

April  
2020



# INSTAND

Kommentar zum  
Extra Ringversuch  
Gruppe 340  
Virusgenom-Nachweis -  
SARS-CoV-2

Prof. Dr. Heinz Zeichhardt

Dr. Martin Kammel

Herausgegeben von:

**INSTAND**

Gesellschaft zur Förderung  
der Qualitätssicherung  
in medizinischen Laboratorien e.V.

## Virologische INSTAND Ringversuche

in Zusammenarbeit mit:

Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten e.V. (DVV)

Gesellschaft für Virologie e.V. (GfV)

Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V. (DGHM)

### Ringversuchsleiter:

Univ.-Prof. i.R. Dr. Heinz Zeichhardt  
Charité - Universitätsmedizin Berlin

### Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. Heinz Zeichhardt  
IQVD GmbH  
Institut für Qualitätssicherung in der Virusdiagnostik  
Potsdamer Chaussee 80, 14129 Berlin  
Tel.: +49-(0)30-81054-300; Fax: +49-(0)30-81054-303  
Email: [Heinz.Zeichhardt@iqvd.de](mailto:Heinz.Zeichhardt@iqvd.de)

### Stellvertretender Ringversuchsleiter:

Dr. Martin Kammel  
c/o INSTAND e.V.  
Ubirstr. 20, 40223 Düsseldorf  
Tel.: +49-(0)30-81054-304; Fax: +49-(0)30-81054-303  
Email: [m.kammel@iqvd.de](mailto:m.kammel@iqvd.de)

*in Kooperation mit:*

### Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institut für Virologie Nationales Konsiliarlaboratorium für Coronaviren

Prof. Dr. Christian Drosten  
Dr. Victor M. Corman  
Dr. Daniela Niemeyer  
Helmut-Ruska-Haus  
Campus Mitte  
Charitéplatz 1, 10117 Berlin  
Tel: +49-(0)30-450 525 092  
Email: [christian.drosten@charite.de](mailto:christian.drosten@charite.de) [victor.corman@charite.de](mailto:victor.corman@charite.de)

Durchgeführt von:

---

**INSTAND e.V.**

**Ubirstr. 20**

**40223 Düsseldorf**

**Tel.: +49 (0)211 - 1592 13 0**

**Fax: +49 (0)211 - 1592 1330**

**Email: [instand@instand-ev.de](mailto:instand@instand-ev.de)**

**Internet: [www.instand-ev.de](http://www.instand-ev.de)**

## **INSTAND-Experten-Laboratorien**

- Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte, Institut für Virologie, Nationales Konsiliarlaboratorium für Coronaviren: Prof. Dr. C. Drosten, Dr. V. M. Corman, Dr. Daniela Niemeyer
- Medizinische Hochschule Hannover, Institut für Virologie, Nationales Konsiliarlaboratorium für Adenoviren: Prof. Dr. T. Schulz, PD Dr. A. Heim, Dr. W. Puppe, Dr. C. Schmitt
- Medizinisches Infektiologiezentrum Berlin: Dr. Martin Obermeier, Dr. Robert Ehret
- Philipps Universität Marburg, Institut für Virologie, Nationales Konsiliarlaboratorium für Filoviren: Prof. Dr. S. Becker, Dr. Ch. Keller, Dr. M. Eickmann
- Robert Koch-Institut, Abt. Infektionskrankheiten, FG 17 Influenzaviren und weitere Viren des Respirationstraktes, Nationales Referenzzentrum für Influenza, Nationales Konsiliarlaboratorium für Respiratorische Syncytialviren (RSV), Parainfluenzaviren, Metapneumoviren, Berlin: Dr. R. Dürwald, Dr. B. Biere, Dr. J. Reiche
- Uniklinik Köln, Institut für Virologie, Nationales Referenzzentrum für Papillom- und Polyomaviren: Prof. Dr. F. Klein, Prof. Dr. U. Wieland, Dr. S. Silling, Dr. R. Kaiser, Dr. E. Heger, Dr. E. Knops
- Universitätsklinikum Bonn, Institut für Virologie: Prof. Dr. A.-M. Eis-Hübinger
- Universitätsklinikum Düsseldorf, Institut für Virologie: Prof. Dr. J. Timm, Prof. Dr. O. Adams, Dr. N. Lübke
- Universitätsklinikum Frankfurt, Institut für Medizinische Virologie, Frankfurt/Main: Prof. Dr. S. Ciesek, Prof. Dr. H. F. Rabenau, Prof. Dr. A. Berger
- Universitätsklinikum Freiburg, Institut für Virologie, Nationales Konsiliarlaboratorium für HSV und VZV: Prof. Dr. H. Hengel, Dr. D. Huzly, Prof. Dr. M. Panning

## **Danksagung**

Ein herzlicher Dank für die außerordentlich kollegiale Zusammenarbeit bei der Etablierung dieses Ringversuchs geht an unsere Kooperationspartner

- Prof. Dr. C. Drosten, Dr. V. M. Corman, Dr. D. Niemeyer, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Campus Mitte, Institut für Virologie, Nationales Konsiliarlaboratorium für Coronaviren
- und an die Mitglieder der ad hoc-Kommission der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV e.V.) und Gesellschaft für Virologie (GfV. e.V.)
- Prof. Dr. H. F. Rabenau, Universitätsklinikum Frankfurt, Institut für Medizinische Virologie, Frankfurt/Main,
  - Dr. M. Obermeier, Medizinisches Infektiologiezentrum Berlin,
  - Dr. R. Kaiser, Uniklinik Köln, Institut für Virologie.

**Wichtige Mitteilung zur Auswertung:**

**Nur 4 der 7 Proben, die im diesem Extra-Ringversuch untersucht wurden, werden für die Erlangung eines Zertifikats über die erfolgreiche Teilnahme berücksichtigt**

Während der Extra-Ringversuch noch lief, erhielt INSTAND e.V. aus dem In- und Ausland dringliche Anfragen, noch vor Ende der verlängerten Abgabefrist, also vor dem 28. April 2020, die Eigenschaften der zu untersuchenden Proben aufzudecken, damit Laboratorien bei etwaigen Fehlmessungen ihre Testmethode kurzfristig verbessern können.

INSTAND e.V. hat sich daraufhin in Abstimmung mit der Gemeinsamen Diagnostikkommission der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten (DVV e.V.) und Gesellschaft für Virologie (GfV e.V.) entschieden, die Eigenschaften von 3 der 7 Ringversuchsproben noch während des laufenden Ringversuchs zur Orientierung aufzudecken und eine Zwischenauswertung mitzuteilen. Basis dafür waren die Ergebnisse von 112 Laboratorien mit Stand vom 14. April 2020, 13:57 Uhr Berlin-Zeit.

Die Zwischenauswertung finden Sie auf der INSTAND Homepage zum download:

[https://www.instand-ev.de/fileadmin/uploads/user\\_upload/Dokumente/Virologie/20200417g\\_DE\\_RV\\_340\\_SARS-CoV-2\\_Zwischenauswertung.pdf](https://www.instand-ev.de/fileadmin/uploads/user_upload/Dokumente/Virologie/20200417g_DE_RV_340_SARS-CoV-2_Zwischenauswertung.pdf)

**Proben, deren Eigenschaften bereits in der Zwischenauswertung aufgedeckt wurden:**

**Proben 340059, 340060 und 340064:**

Alle eingereichten Ergebnisse für diese 3 vorab „aufgedeckten“ Proben werden in diesem Kommentar lediglich dargestellt, jedoch für die Erteilung des Zertifikates nicht berücksichtigt.

**Proben, deren Eigenschaften erst mit diesem Kommentar aufgedeckt werden:**

**Proben 340061, 340062, 340063 und 340065:**

Für diese 4 Proben werden für die Erteilung eines Zertifikats alle Ergebnisse berücksichtigt, die bis zur verlängerten Abgabefrist am 28.04.2020 eingereicht worden sind.

**Darstellung der Ergebnisse**

Im folgenden Kommentar werden die Ergebnisse für alle 7 im Ringversuch untersuchten Proben dargestellt, wobei eine Ergebnisdifferenzierung hinsichtlich der nachgewiesenen Gen-Region von SARS-CoV-2 vorgenommen wird.

## **Gliederung des Kommentars**

### **1 Erläuterungen zur Auswertung**

- 1.1 Richtlinie der Bundesärztekammer (RiliBÄK)
- 1.2 Veröffentlichung der Kommentare mit Endauswertungen
- 1.3 Teilnahmedokumente
  - 1.3.1 Erteilung eines Zertifikats über die erfolgreiche Teilnahme
  - 1.3.2 Gültigkeitsdauer der Zertifikate
  - 1.3.3 Nächste INSTAND-Ringversuche zum Virusgenom-Nachweis von Coronaviren inkl. SARS-CoV-2 im Jahr 2020
- 1.4 Auflistung und Bewertung der Ergebnisse und individuelle Gesamtübersicht
- 1.5 Gesamtübersicht über die Ergebnisse des Kollektivs und deren Bewertung
- 1.6 Eingesetzte Proben
- 1.7 Zielwerte
- 1.8 Ermittlung der Bewertungsbereiche

### **2 Kommentar des Ringversuchsleiters**

- 2.1 Parameter, Ergebnisangaben und Bewertungskriterien für diesen Ringversuch
- 2.2 Probeneigenschaften
- 2.3 Zusammenfassung der Probeneigenschaften, Sollwerte, Ergebnisse und Erfolgsquoten
- 2.4 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
  - 2.4.1 Ergebnisse für die vier SARS-CoV-2 positiven Proben
    - 2.4.1.1 Qualitative Ergebnisse aufgeschlüsselt nach verwendetem Test und Gen-Region
    - 2.4.1.2 Gemeldete Ct/Cp/Cq/CN-Werte aufgeschlüsselt nach Gen-Region
    - 2.4.1.3 Quantitative Ergebnisse
      - 2.4.1.3.1 Quantitative Ergebnisse, die mit digitaler PCR (dPCR) ermittelt wurden
  - 2.4.2 Ergebnisse für die drei SARS-CoV-2 negativen Proben zur Spezifitätskontrolle der verwendeten SARS-CoV-2 Teste
    - 2.4.2.1 Qualitative Ergebnisse der drei SARS-CoV-2 negativen Proben, aufgeschlüsselt nach verwendetem Test und Gen-Region

### **3 Anhang mit Tabellen**

- 3.1 Qualitativer Genomnachweis von SARS-CoV-2

### **4 Danksagung**

## 1 Erläuterungen zur Auswertung

### 1.1 Richtlinie der Bundesärztekammer (RiliBÄK)

Der INSTAND-Ringversuch "Virusgenom-Nachweis - Coronaviren" (340) ist nicht im speziellen RiliBÄK-Teil B 3 "Direkter Nachweis und Charakterisierung von Infektionserregern" der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK) aufgeführt, wird von INSTAND e.V. jedoch RiliBÄK-konform nach den Vorgaben des speziellen RiliBÄK-Teils B 3 durchgeführt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Gemäß Beschluss des Vorstands der Bundesärztekammer in seiner Sitzung am 18.10.2019 ist mit Veröffentlichung im Deutschen Ärzteblatt am 23. Dezember 2019 eine Neufassung der Richtlinie der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung (RiliBÄK 2019) in Kraft getreten (DOI: 10.3238/arztebl.2019.rili_baek_QS_Labor20192312). Im Hinblick auf die virologischen Ringversuche wurden folgende Untersuchungen als <b>neue RiliBÄK-pflichtigen Untersuchungen</b> aufgenommen:<br/>           Immunologischen Ringversuche (siehe Tabelle B2-2)<br/>           Masern-Virus, Antikörper gegen<br/>           Mumps-Virus, Antikörper gegen<br/>           Varicella-Zoster-Virus, Antikörper gegen<br/><br/>           Ringversuche zum direkten Erregernachweis (siehe Tabelle B3-2)<br/>           Hepatitis-E-Virus, Genom-Nachweis<br/>           Masern-Virus, Genom-Nachweis<br/>           Mumps-Virus, Genom-Nachweis<br/>           Norovirus, Genom-Nachweis<br/>           Röteln-Virus, Genom-Nachweis<br/>           West-Nil-Virus, Genom-Nachweis</li> </ul> |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Für den nachfolgenden Kommentar zum Ringversuchstermin April 2020 wird auf die Fassung gemäß Beschluss des Vorstands der BÄK vom 11.04.2014 und 20.06.2014 verwiesen, die bis zum Ablauf der Übergangsfrist am 22. Dezember 2021 noch in Kraft ist.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

### 1.2 Veröffentlichung der Kommentare mit Endauswertungen

Jeder Teilnehmer dieses Ringversuchs erhält eine Email, in der der Kommentar mit Endauswertung über einen Link als PDF-Dokument direkt zugänglich ist.

Weiterhin werden alle Kommentare der einzelnen virologischen Ringversuchsprogramme nach Fertigstellung kontinuierlich als PDF-Dateien auf der INSTAND-Homepage veröffentlicht unter "Ringversuche Online / Ringversuche Service / Fachgebiet (Virusgenom-Nachweis)" in deutscher Sprache (<http://www.instand-ev.de/ringversuche-online/ringversuche-service.html>) und in englischer Sprache (<http://www.instand-ev.de/en/eqas-online/service-for-ega-tests.html>).

### 1.3 Teilnahmedokumente

Zu diesem Extra Ringversuch (340) "Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2" April 2020 sind folgende Teilnahmedokumente online abrufbar im RV-Online System unter <https://rv-online.instandev.de/> :

- Zertifikat,
- Teilnahmebescheinigung,
- Auflistung und Bewertung der Ergebnisse,
- Individuelle Gesamtübersicht.

In der " Auflistung und Bewertung der Ergebnisse " sind die Untersuchungen der jeweiligen Analyte, zugeordnet zu einzelnen Parametern, aufgeführt, für die die Anforderungen des Ringversuchs erfüllt sind. Jeder Parameter wird für das Zertifikat einzeln bewertet und in den Teilnahmedokumenten und Auswertungsunterlagen jeweils aufgeführt.

Der Extra-Ringversuch "Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2" (340) enthält folgende Parameter:

**Parameter**

(70) SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ

(60) SARS-CoV-2 (RNA) – quantitativ

**1.3.1 Erteilung eines Zertifikats über die erfolgreiche Teilnahme**

Der INSTAND-Extra-Ringversuch "Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2" (340) ist nicht im speziellen RiliBÄK-Teil B 3 vom November 2014 aufgeführt, wird von INSTAND e.V. jedoch RiliBÄK-konform durchgeführt.

Nach der RiliBÄK zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen ist im speziellen Teil E 3 "Spezielle Anforderungen an Ringversuche zum laboratoriumsmedizinischen Nachweis und zur Charakterisierung von Infektionserregern" unter Punkt 3 "Bewertung der Ringversuchsergebnisse" im Satz 1 festgelegt: "Die Bewertung erfolgt anhand der Zielergebnisse. Die Bewertungskriterien müssen bei allen Proben erfüllt sein. ...". Somit ist die Voraussetzung für die Ergebnisberücksichtigung zur Erteilung eines Zertifikats, dass in den jeweiligen Parametern dieses Ringversuchs 100% richtige Ergebnisse für die 4 in diesem Ringversuch bewerteten Proben entsprechend dem vorgegebenen Sollwert erzielt wurden. Siehe dazu auf Seite 4: „Wichtige Mitteilung zum Kommentar“.

**Beispiel - Programm "Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2" (340):**

In dem Parameter 70 "SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ" müssen alle 4 bewerteten Proben des Probensatzes in Übereinstimmung mit den jeweils vorgegebenen Sollwerten durchweg richtig bestimmt worden sein. Entsprechendes gilt für den Parameter 60 dieses Programms.

Bei diesem Ringversuch wird zur Bewertung der quantitativen Angaben als "richtiges" Ergebnis zu jeder Probe eine Abweichung von -1.0 bis +1.0 vom dekadisch logarithmierten Sollwert zugelassen (entspricht einem Intervall von  $-1.0 \log_{10}$  bis  $+1.0 \log_{10}$  um den Sollwert bezogen auf die Ergebnisse aller Methoden).

Zur Orientierung werden zusätzlich in den nachfolgenden Tabellen dieses Kommentars die quantitativen Ergebnisse im Intervall von  $-0.8 \log_{10}$  bis  $+0.8 \log_{10}$  sowie im Intervall von  $-0.25 \log_{10}$  bis  $+0.25 \log_{10}$  um den Sollwert (bezogen auf die Ergebnisse aller Methoden) gezeigt.

**1.3.2 Gültigkeitsdauer der Zertifikate**

Der INSTAND-Extra-Ringversuch "Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2" (340) ist nicht im speziellen RiliBÄK-Teil B 3 aufgeführt, wird von INSTAND e.V. jedoch RiliBÄK-konform durchgeführt.

Wie für Ringversuche, die im speziellen RiliBÄK-Teil B 3 geregelt sind, beträgt die Gültigkeitsdauer für den Extra Ringversuch (340) "Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2" 12 Monate. Die Gültigkeitsdauer eines Zertifikats bezieht sich auf den Abgabeschluss des Ringversuchs. Dieses Datum wird oben auf den Zertifikaten ausgedruckt.

**1.3.3 Nächste INSTAND-Ringversuche zum Virusgenom-Nachweis von Coronaviren inkl. SARS-CoV-2 im Jahr 2020**

| RV Juni/Juli 2020                         | RV November 2020                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Neue Termine</b>                       | <b>Termine</b>                              |
| Anmeldeschluss: Donnerstag, 11. Juni 2020 | Anmeldeschluss: Freitag, 25. September 2020 |
| Versandtermin: Mittwoch, 24. Juni 2020    | Versandtermin: Mittwoch, 11. November 2020  |
| Rücksendetermin: Mittwoch, 22. Juli 2020  | Rücksendetermin: Freitag, 27. November 2020 |

Während beim Extra-Ringversuch im April 2020 der Genomnachweis von SARS-CoV-2 im Vordergrund stand, werden die kommenden molekularen Coronavirus-Ringversuche im Juni/Juli und November 2020 erweitert und die Möglichkeit zur Differenzierung zwischen SARS-CoV-2, MERS-CoV und anderen humanen CoV bieten.

ACHTUNG: An diesen Ringversuchen im Juni/Juli und November 2020 können Laboratorien mit unterschiedlichem Leistungsspektrum teilnehmen: (i) Laboratorien, die ausschließlich Genomnachweise auf SARS-CoV-2 durchführen, und (ii) Laboratorien, die zusätzlich eine Differenzierung zwischen verschiedenen CoV vornehmen.

#### 1.4 Auflistung und Bewertung der Ergebnisse und individuelle Gesamtübersicht

Zu diesem Extra-Ringversuch "Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2 (RNA)" (340) ist eine "Auflistung und Bewertung der Ergebnisse" zusammen mit dem "Zertifikat", der "Teilnahmebescheinigung" und eine "individuelle Gesamtübersicht" online abrufbar im RV-Online System unter <https://rv-online.instandev.de/>.

In der "Auflistung und Bewertung der Ergebnisse" werden zu jeder qualitativen Untersuchung, zugeordnet zu den einzelnen Parametern, das "richtige Ergebnis" mit dem Sollwert als "korrekte Angabe(n)" aufgeführt. Für quantitative Untersuchungen (Analyte) wird neben dem Sollwert (Spalte "Zielwert") zusätzlich der als richtig bewertete Bereich mit den Angaben "untere Grenze" und "obere Grenze" aufgeführt. Das vom Labor berichtete Ergebnis wird als "Ihre Angabe(n)" (qualitative Angaben) bzw. "Ihr Wert" (quantitative Angaben) dargestellt.

Diese Angaben werden zeilenweise zu jeder untersuchten Probe gemacht. Ein "+" in jeder Probenzeile (Spalte "Kriterien erfüllt") zeigt an, ob das entsprechende Ergebnis als "richtig" gewertet wurde.

Zusätzlich zeigt ein "+" rechts in der Titelzeile für den jeweiligen Parameter an, dass ein Zertifikat erteilt wird. Voraussetzung dafür ist, dass für alle Proben des entsprechenden Parameters **100% richtige Ergebnisse** entsprechend den vorgegebenen Sollwerten erzielt worden sind.

In der "individuellen Gesamtübersicht" wird für jeden vom Labor durchgeführten qualitativen und/oder quantitativen Parameter die Häufigkeit der Teilnehmerangaben - differenziert nach Probennummer, Testhersteller und Testnamen - aufgeführt. Zusätzlich wird das vom jeweiligen Labor eingesetzte Testsystem (Hersteller und Testname) durch einen orange-farbigen Balken in der entsprechenden Zeile markiert. Im Falle von qualitativen Angaben wird dem Labor in der entsprechenden Spalte ergänzend das dazugehörige Ergebnis durch einen orange-farbigen Balken markiert. Korrekt bewertete qualitative Angaben sind mit einem Punkt hervorgehoben.

#### 1.5 Gesamtübersicht über die Ergebnisse des Kollektivs und deren Bewertung

Für jede einzelne Probe werden in einer Gesamtübersicht die Ergebnisse des Kollektivs mit einer Aufschlüsselung nach Parametern dargestellt. Dabei wird für jede einzelne Probe eine Erfolgsquote in Bezug auf die richtigen Ergebnisse angegeben. Der Anteil der richtigen Ergebnisse wird angegeben in "Prozent" und als "Anzahl der richtigen Ergebnisse pro Anzahl aller gemeldeten Ergebnisse". Bezogen auf die Ergebnisse der 4 bewerteten Proben des Probensatzes wird zusätzlich für jeden Parameter eine Gesamterfolgsquote für die "richtig" bewerteten Ergebnisse angegeben.

Siehe Tabelle 3 im Abschnitt 2: Kommentar des Ringversuchsleiters.

#### 1.6 Eingesetzte Proben

Beim Extra Ringversuch (340) "Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2" April 2020 werden Lysate von Zellen eingesetzt, die mit humanen Coronaviren (SARS-CoV-2, HCoV OC43 oder HCoV 229E) infiziert worden sind. **SARS-CoV-2 positive Proben enthalten hitzeinaktiviertes Virus.**

Bei negativen Proben handelt es sich um Lysate nicht-infizierter Zellen.

Die Proben sind lyophilisiert und müssen vor der Durchführung der Untersuchung in 1.1 ml Aqua bidest. (steril, pyrogenfrei, PCR-Grade) rekonstituiert werden.

## 1.7 Zielwerte

---

Da für die Virusdiagnostik keine Referenzmessverfahren zur Zielwertermittlung existieren, werden zur Auswertung der Ringversuchsergebnisse Sollwerte ermittelt.

Zur Ermittlung des Sollwertes jeder Ringversuchsprobe bestätigen die vorne genannten INSTAND-Experten-Laboratorien vor dem Ringversuch die Probeneigenschaften zur Verifizierung des vom Ringversuchsleiter erwarteten Sollwerts. An dem regulären Ringversuch nehmen die INSTAND-Experten-Laboratorien noch einmal teil. Der **endgültige Sollwert jeder Probe** ist der qualitative Konsenswert bzw. der aus dem Gesamtkollektiv ermittelte quantitative Konsenswert (basierend auf dem robusten Mittelwert nach Algorithmus A/DIN ISO 13528/ Anhang C). Dabei werden die im Ringversuch gemeldeten Ergebnisse der vorne genannten INSTAND-Experten-Laboratorien mitberücksichtigt.

### ***Zulässige Ergebnisangaben entsprechend der jeweiligen Probeneigenschaft***

- **Quantitative Ergebnisse** - Angabe als "Genomäquivalente/ml = Kopien/ml" bzw. "unterhalb Nachweisgrenze"  
Für die Angabe "unterhalb Nachweisgrenze" soll zum Beispiel bei einem Testsystem mit Nachweisgrenze 50 Kopien/ml das Resultat als "< 50" in der Eingabemaske im Feld "Ergebnis (quant)" vermerkt werden.
- **Qualitative Ergebnisse** - "positiv", "unterhalb Nachweisgrenze/negativ" bzw. "fraglich" (nominale Merkmale)

Bei Abweichungen vom Sollwert wird analysiert, ob die fehlerhaften Ergebnisse auf laborinternen Fehlern oder auf Unzulänglichkeiten kommerzieller oder eigen hergestellter Tests (testimmanenten Problemen) beruhen. Die Problemanalyse wird in Zusammenarbeit mit den INSTAND-Experten-Laboratorien unter der Federführung des Ringversuchsleiters in Kooperation mit der Gemeinsamen Diagnostikkommission von DVV und GfV vorgenommen.

## 1.8 Ermittlung der Bewertungsbereiche

---

Der Bewertungsbereich für jede SARS-CoV-2-positive Probe entspricht einem Sollwertbereich, der mit einer zulässigen Abweichung von  $-1.0 \log_{10}$  bis  $+1.0 \log_{10}$  um den Sollwert (bezogen auf die Ergebnisse aller Methoden) festgelegt ist.

Der **endgültige Sollwert jeder positiven Probe** ist der aus dem Kollektiv ermittelte quantitative Konsenswert (siehe auch Abschnitt "Zielwerte").

## 2 Kommentar des Ringversuchsleiters

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

im Folgenden erhalten Sie den ausführlichen Kommentar zu diesem Extra Ringversuch (340) "Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2" vom April 2020 mit:

- Angaben zu den Parametern, Ergebnisangaben und Bewertungskriterien,
- Angaben zu den Probeneigenschaften,
- einer Zusammenfassung der Probeneigenschaften, Sollwerte, Ergebnisse und Erfolgsquoten sowie
- einem Anhang mit ausführlicher Darstellung aller qualitativen und quantitativen Ergebnisse inklusive einer Differenzierung für alle Proben nach  
Gen-Region,  
Hersteller,  
Testnamen,  
Median von Ct/Cp/Cq/CN-Werten,  
niedrigstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert und  
höchstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert.

**An diesem Ringversuch nahmen insgesamt teil:**

**463 Laboratorien**

### 2.1 Parameter, Ergebnisangaben und Bewertungskriterien für diesen Ringversuch

In diesem Ringversuch wurden zu den einzelnen Parametern folgende Ergebnisangaben, differenziert nach Gen-Regionen von SARS-CoV-2, erbeten. Die Grundlage für die Bewertung ist (s. Tabelle 1):

**Tabelle 1: Parameter, Ergebnisangaben und Bewertungskriterien**

| Parameter                           | Ergebnisangaben<br>folgende Ergebnisangaben<br>wurden erbeten                                | Bewertungskriterien<br>Anzahl richtig bestimmter Proben<br>zum Erhalt<br>eines Zertifikats |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (70) SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ  | <b>positiv</b><br>oder<br><b>unterhalb Nachweisgrenze/negativ</b><br>oder<br><b>fraglich</b> | 4 der 4 Proben, die in diesem<br>Extra-Ringversuch bewertet sind <sup>§</sup>              |
| (60) SARS-CoV-2 (RNA) – quantitativ | <b>Genomäquivalente/ml = Kopien/ml</b><br>oder<br><b>unterhalb Nachweisgrenze</b>            | 4 der 4 Proben, die in diesem<br>Extra-Ringversuch bewertet sind <sup>§</sup>              |

<sup>§</sup> In der Zwischenauswertung vom 17. April 2020 wurden allen Teilnehmern des Extra INSTAND Ringversuchs (340) Virusgenom-Nachweis von SARS-CoV-2 April 2020 die Probeneigenschaften der Proben 340059, 340060 und 340064 vorzeitig mitgeteilt. Die Ergebnisse dieser 3 Proben bleiben für die Erteilung eines Zertifikats unberücksichtigt.

Zur Bewertung für die Erteilung des Zertifikats werden die eingereichten Ergebnisse für die Proben 340061, 340062, 340063 und 340065 berücksichtigt.

## 2.2 Probeneigenschaften

Für den Extra Ringversuch (340) "Virusgenom-Nachweis – SARS-CoV-2" April 2020 wurden folgende 7 Proben versandt:

**Tabelle 2: Probeneigenschaften**

| Proben-Nr.          | Probenherkunft                                                                               | Verdünnung             | Für Zertifikats-erteilung bewertet |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 340059*,\$          | <b>SARS-CoV-2 positiv</b> , Lysat von SARS-CoV-2-infizierten Zellen (SARS-CoV-2 inaktiviert) | 1 : 1 000*,\$          | nein <sup>§</sup>                  |
| 340060 <sup>§</sup> | <b>SARS-CoV-2 negativ</b> , Lysat von HCoV OC43-infizierten Zellen als Spezifitätskontrolle  | 1 : 2 500 <sup>§</sup> | nein <sup>§</sup>                  |
| 340061*             | <b>SARS-CoV-2 positiv</b> , Lysat von SARS-CoV-2 infizierten Zellen (SARS-CoV-2 inaktiviert) | 1 : 1 000 000*         | ja                                 |
| 340062              | <b>SARS-CoV-2 negativ</b> , Lysat von nicht-infizierten Zellen als Spezifitätskontrolle      | ----                   | ja                                 |
| 340063*             | <b>SARS-CoV-2 positiv</b> , Lysat von SARS-CoV-2 infizierten Zellen (SARS-CoV-2 inaktiviert) | 1 : 10 000*            | ja                                 |
| 340064*,\$          | <b>SARS-CoV-2 positiv</b> , Lysat von SARS-CoV-2 infizierten Zellen (SARS-CoV-2 inaktiviert) | 1 : 100 000*,\$        | nein <sup>§</sup>                  |
| 340065              | <b>SARS-CoV-2 negativ</b> , Lysat von HCoV 229E-infizierten Zellen als Spezifitätskontrolle  | 1 : 2 500              | ja                                 |

\* Die positiven Proben 340059, 340061, 340063 und 340064 sind Verdünnungsstufen aus einer Verdünnungsreihe eines Lysats von Zellen, die mit SARS-CoV-2 infiziert worden sind.

<sup>§</sup> In der Zwischenauswertung vom 17. April 2020 wurden allen Teilnehmern des Extra INSTAND Ringversuchs (340) Virusgenom-Nachweis von SARS-CoV-2 April 2020 die Probeneigenschaften der Proben 340059, 340060 und 340064 vorzeitig mitgeteilt. Die Ergebnisse dieser 3 Proben bleiben für die Erteilung eines Zertifikats unberücksichtigt.

Zur Bewertung für die Erteilung des Zertifikats werden die eingereichten Ergebnisse für die Proben 340061, 340062, 340063 und 340065 berücksichtigt.

### 2.3 Zusammenfassung der Probeneigenschaften, Sollwerte, Ergebnisse und Erfolgsquoten

**Tabelle 3: Qualitative Ergebnisse -**  
**Zusammenfassung der Probeneigenschaften, Sollwerte, Ergebnisse, Erfolgsquoten, Mediane von**  
**Ct/Cp/Cq/CN-Werten sowie niedrigstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert und**  
**höchstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert - differenziert nach Gen-Region**

| Proben-Nr.                  | Probeneigenschaft                                                                                | Erwartetes qualitatives Ergebnis für SARS-CoV-2 | Gen-Region        | richtige Ergebnisse pro gemeldete Ergebnisse differenziert nach Gen-Region | gemeldete Ct/Cp/Cq/CN-Werte differenziert nach Gen-Region Median (Min – Max) |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Probe 340059 <sup>§,*</sup> | SARS-CoV-2<br>1 : 1 000 verdünnt<br><br>Probe nicht bewertet <sup>§</sup>                        | positiv                                         | E                 | 373/373 (100%)                                                             | 22.6 (16.8-34.0)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | N                 | 165/167 (98.8%)                                                            | 23.6 (17.9-34.9)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | ORF1a             | 45/46 (97.8%)                                                              | 22.2 (20.8-28.7)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | ORF1ab            | 48/48 (100%)                                                               | 21.8 (10.9-29.1)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | RdRP              | 185/185 (100%)                                                             | 23.8 (10.0-34.5)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | S                 | 100/100 (100%)                                                             | 21.8 (17.5-27.8)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | k.A. <sup>§</sup> | 64/64 (100%)                                                               | 22.6 ( 9.4-33.0)                                                             |
|                             |                                                                                                  | Gesamt                                          |                   | <b>980/983 (99.7%)<sup>§</sup></b>                                         | <b>22.8</b>                                                                  |
| Probe 340060 <sup>§</sup>   | HCoV OC43<br>1 : 2 500 verdünnt<br>Spezifitätskontrolle<br><br>Probe nicht bewertet <sup>§</sup> | negativ                                         | E                 | 368/373 (98.7%)                                                            | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | N                 | 162/166 (97.6%)                                                            | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | ORF1a             | 45/46 (97.8%)                                                              | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | ORF1ab            | 45/48 (93.8%)                                                              | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | RdRP              | 178/181 (98.3%)                                                            | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | S                 | 99/100 (99.0%)                                                             | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | k.A. <sup>§</sup> | 64/64 (100%)                                                               | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  | Gesamt                                          |                   | <b>961/983 (97.8%)<sup>§</sup></b>                                         | <b>-</b>                                                                     |
| Probe 340061*               | SARS-CoV-2<br>1 : 1 000 000 verdünnt                                                             | positiv                                         | E                 | 364/373 (97.6%)                                                            | 32.1 (15.0-40.0)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | N                 | 153/167 (91.6%)                                                            | 33.3 (20.0-40.7)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | ORF1a             | 44/46 (95.7%)                                                              | 31.7 (30.6-36.0)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | ORF1ab            | 42/48 (87.5%)                                                              | 31.5 (20.0-39.3)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | RdRP              | 158/185 (85.4%)                                                            | 33.5 (19.5-42.8)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | S                 | 97/100 (97.0%)                                                             | 31.5 (20.0-39.0)                                                             |
|                             |                                                                                                  |                                                 | k.A. <sup>§</sup> | 56/64 (87.5%)                                                              | 31.9 (19.3-37.5)                                                             |
|                             |                                                                                                  | Gesamt                                          |                   | <b>914/983 (93.0%)</b>                                                     | <b>32.4</b>                                                                  |
| Probe 340062                | CoV negativ                                                                                      | negativ                                         | E                 | 371/373 (99.5%)                                                            | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | N                 | 164/167 (98.2%)                                                            | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | ORF1a             | 46/46 (100%)                                                               | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | ORF1ab            | 47/48 (97.9%)                                                              | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | RdRP              | 178/182 (97.8%)                                                            | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | S                 | 99/100 (99.0%)                                                             | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  |                                                 | k.A. <sup>§</sup> | 64/64 (100%)                                                               | -                                                                            |
|                             |                                                                                                  | Gesamt                                          |                   | <b>969/983 (98.6%)</b>                                                     | <b>-</b>                                                                     |

**Tabelle 3 (Fortsetzung): Qualitative Ergebnisse -  
Zusammenfassung der Probeneigenschaften, Sollwerte, Ergebnisse, Erfolgsquoten, Mediane von  
Ct/Cp/Cq/CN-Werten sowie niedrigstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert und  
höchstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert - differenziert nach Gen-Region**

| Proben-Nr.                                                       | Probeneigenschaft                                                           | Erwartetes qualitatives Ergebnis für SARS-CoV-2 | Gen-Region        | richtige Ergebnisse pro gemeldete Ergebnisse differenziert nach Gen-Region | gemeldete Ct/Cp/Cq/Cn-Werte differenziert nach Gen-Region Median (Min – Max) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Probe 340063*                                                    | SARS-CoV-2<br>1 : 10 000 verdünnt                                           | positiv                                         | E                 | 368/371 (99.2%)                                                            | 25.7 (19.8-35.3)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | N                 | 165/167 (98.8%)                                                            | 26.9 (20.0-39.6)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | ORF1a             | 45/46 (97.8%)                                                              | 25.5 (24.0-31.5)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | ORF1ab            | 45/47 (95.7%)                                                              | 24.7 (14.5-33.4)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | RdRP              | 184/184 (100%)                                                             | 27.2 (13.4-38.3)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | S                 | 100/100 (100%)                                                             | 25.0 (18.0-30.0)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | k.A. <sup>§</sup> | 64/64 (100%)                                                               | 25.7 (12.8-35.9)                                                             |
|                                                                  |                                                                             | Gesamt                                          |                   | 971/983 (98.8%)                                                            | 26.0                                                                         |
| Probe 340064 <sup>§,*</sup>                                      | SARS-CoV-2<br>1 : 100 000 verdünnt<br><br>Probe nicht bewertet <sup>§</sup> | positiv                                         | E                 | 356/373 (95.4%)                                                            | 29.2 (17.7-36.0)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | N                 | 146/166 (88.0%)                                                            | 30.2 (20.0-41.5)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | ORF1a             | 44/46 (95.7%)                                                              | 28.8 (27.3-34.0)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | ORF1ab            | 41/48 (85.4%)                                                              | 28.8 (18.4-37.0)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | RdRP              | 168/185 (90,8%)                                                            | 30.5 (16.0-41.4)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | S                 | 97/100 (97.0%)                                                             | 28.6 (20.0-34.2)                                                             |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | k.A. <sup>§</sup> | 64/64 (100%)                                                               | 29.0 (16.5-40.0)                                                             |
|                                                                  |                                                                             | Gesamt                                          |                   | 916/983 (93.2%) <sup>§</sup>                                               | 29.5                                                                         |
| Probe 340065                                                     | HCoV 229E<br>1 : 2 500 verdünnt<br>Spezifitätskontrolle                     | negativ                                         | E                 | 355/373 (95.2%)                                                            | -                                                                            |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | N                 | 146/166 (88.0%)                                                            | -                                                                            |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | ORF1a             | 44/46 (95.7%)                                                              | -                                                                            |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | ORF1ab            | 41/48 (85.4%)                                                              | -                                                                            |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | RdRP              | 165/182 (90.7%)                                                            | -                                                                            |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | S                 | 93/100 (93.0%)                                                             | -                                                                            |
|                                                                  |                                                                             |                                                 | k.A. <sup>§</sup> | 64/64 (100%)                                                               | -                                                                            |
|                                                                  |                                                                             | Gesamt                                          |                   | 908/983 (92.4%)                                                            | -                                                                            |
| Gesamterfolgsquote für alle 4 bewerteten Proben <sup>&amp;</sup> |                                                                             |                                                 |                   | 428/461 (92.8%) <sup>&amp;</sup>                                           |                                                                              |

\* Die positiven Proben 340059, 340061, 340063 und 340064 sind Verdünnungsstufen aus einer Verdünnungsreihe eines Lysats von Zellen, die mit SARS-CoV-2 infiziert worden sind (inaktiviert).

§ In der Zwischenauswertung vom 17. April 2020 wurden allen Teilnehmern des Extra INSTAND Ringversuchs (340) Virusgenom-Nachweis von SARS-CoV-2 April 2020 die Probeneigenschaften der Proben 340059, 340060 und 340064 vorzeitig mitgeteilt. Die Ergebnisse dieser 3 Proben bleiben für die Erteilung eines Zertifikats unberücksichtigt.

Zur Bewertung für die Erteilung des Zertifikats werden die eingereichten Ergebnisse für die Proben 340061, 340062, 340063 und 340065 berücksichtigt.

§ k.A. = keine Angabe = Genregion von den Teilnehmern nicht spezifiziert

& Die Gesamterfolgsquote für alle 4 bewerteten Proben des Probensatzes in dem Parameter 70 beziehen sich jeweils auf die Anzahl der teilnehmenden Laboratorien. Laboratorien, die für einzelne Parameter Ergebnisse mehrerer Tests / Gen-Regionen gemeldet haben, sind nur einmal erfasst.

Tabelle 4: Quantitative Ergebnisse - Zusammenfassung der Probeneigenschaften, Sollwerte, Ergebnisse und Erfolgsquoten

| Proben-Nr.        | 340059* <sup>§</sup>  | 340060 <sup>§</sup>                | 340061*               | 340062                | 340063*               | 340064* <sup>§</sup>  | 340065                             | Gesamt-<br>erfolgsquote<br>für alle<br>Proben <sup>&amp;</sup> |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Probeneigenschaft | SARS-CoV-2<br>positiv | SARS-CoV-2<br>negativ<br>HCoV OC43 | SARS-CoV-2<br>positiv | SARS-CoV-2<br>negativ | SARS-CoV-2<br>positiv | SARS-CoV-2<br>positiv | SARS-CoV-2<br>negativ<br>HCoV 229E |                                                                |
| Verdünnung        | 1 : 1 000*            | 1 : 2 500                          | 1 : 1 000 000*        | ---                   | 1 : 10 000*           | 1 : 100 000*          | 1 : 2 500                          |                                                                |

**SARS-CoV-2 (RNA) - quantitativ in Kopien/ml – Parameter 60**  
(für Zertifikatserteilung)

|                                                                                              |                               |                               |                  |                  |                         |                               |                  |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Sollwerte für<br>alle Methoden <sup>#</sup>                                                  | 17 071 604 <sup>§</sup>       | 0 <sup>§</sup>                | 25 978           | 0                | 2 198 982               | 220 046 <sup>§</sup>          | 0                |                                                    |
| <u>Bewertungsbereich</u> Intervall +/-<br>1.0 log <sub>10</sub> um den Sollwert <sup>#</sup> | 1 707 160 –<br>170 716 040    | 0 – 0                         | 2 598 – 259 780  | 0 – 0            | 219 898 –<br>21 989 820 | 22 005 –<br>2 200 460         | 0 – 0            |                                                    |
| mit "richtig" bewertete<br>Ergebnisse im Intervall                                           | 76.5% <sup>§</sup><br>(26/34) | 97.1% <sup>§</sup><br>(33/34) | 73.5%<br>(25/34) | 97.1%<br>(33/34) | 73.5%<br>(25/34)        | 70.6% <sup>§</sup><br>(24/34) | 94.1%<br>(32/34) | 71.4% <sup>&amp;</sup><br>(15/21) <sup>&amp;</sup> |

Zusätzliche Intervalle zur Orientierung

|                                                                     |                               |                               |                  |                  |                          |                               |                  |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| Intervall +/-0.8 log <sub>10</sub> um den<br>Sollwert <sup>#</sup>  | 2 705 667 –<br>107 714 539    | 0 – 0                         | 4 117 – 163 910  | 0 – 0            | 348 515 –<br>13 874 638  | 34 875 –<br>1 388 396         | 0 – 0            |                                                    |
| Ergebnisse in<br>diesem Intervall                                   | 67.6% <sup>§</sup><br>(23/34) | 97.1% <sup>§</sup><br>(33/34) | 55.9%<br>(19/34) | 97.1%<br>(33/34) | 64.7%<br>(22/34)         | 58.8% <sup>§</sup><br>(20/34) | 94.1%<br>(32/34) | 66.7% <sup>&amp;</sup><br>(14/21) <sup>&amp;</sup> |
| Intervall +/-0.25 log <sub>10</sub> um den<br>Sollwert <sup>#</sup> | 9 600 068 –<br>30 358 082     | 0 – 0                         | 14 609 – 46 196  | 0 – 0            | 1 236 578 –<br>3 910 404 | 123 741 –<br>391 303          | 0 – 0            |                                                    |
| Ergebnisse in<br>diesem Intervall                                   | 17.6% <sup>§</sup><br>(6/34)  | 97.1% <sup>§</sup><br>(33/34) | 14.7%<br>(5/34)  | 97.1%<br>(33/34) | 14.7%<br>(5/34)          | 8.8% <sup>§</sup><br>(3/34)   | 94.1%<br>(32/34) | 14.3% <sup>&amp;</sup><br>(3/21) <sup>&amp;</sup>  |

\* Die positiven Proben 340059, 340061, 340063 und 340064 sind Verdünnungsstufen aus einer Verdünnungsreihe eines Lysats von Zellen, die mit SARS-CoV-2 infiziert worden sind (inaktiviert).

& Die Gesamterfolgsquote für alle 4 bewerteten Proben des Probensatzes in dem Parameter 60 beziehen sich jeweils auf die Anzahl der teilnehmenden Laboratorien. Laboratorien, die für einzelne Parameter Ergebnisse mehrerer Tests / Gen-Regionen gemeldet haben, sind nur einmal erfasst.

# Sollwerte für alle Methoden: für positive Proben, ermittelt aus den quantitativen Ergebnissen aller Ringversuchsteilnehmer (s. Abschnitt "Zielwerte").

§ In der Zwischenauswertung vom 17. April 2020 wurden allen Teilnehmern des Extra INSTAND Ringversuchs (340) Virusgenom-Nachweis von SARS-CoV-2 April 2020 die Probeneigenschaften der Proben 340059, 340060 und 340064 vorzeitig mitgeteilt. Die Ergebnisse dieser 3 Proben bleiben für die Erteilung eines Zertifikats unberücksichtigt.

Zur Bewertung für die Erteilung des Zertifikats werden die eingereichten Ergebnisse für die Proben 340061, 340062, 340063 und 340065 berücksichtigt.

Kommentar zum INSTAND e.V. Extra-Ringversuch 340 – April 2020

Tabelle 5: Quantitative Ergebnisse - SARS-CoV-2 (RNA) – Meldungen in Kopien/ml von 21 Laboren – Parameter 60

| Proben-Nr.             | 340059*,\$         | 340060\$                        | 340061*            | 340062             | 340063*            | 340064*,\$         | 340065                          |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Probeneigenschaft      | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 negativ<br>HCoV OC43 | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 negativ | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 negativ<br>HCoV 229E |
| Verdünnung             | 1 : 1 000*         | 1 : 2 500                       | 1 : 1 000 000*     | ---                | 1 : 10 000*        | 1 : 100 000*       | 1 : 2 500                       |
| Methode /<br>Genregion | Teilnehmer- Nr.    | Kopien/ml                       | Kopien/ml          | Kopien/ml          | Kopien/ml          | Kopien/ml          | Kopien/ml                       |
| dPCR / E-Gen           | 4233               | 6 944 589                       | 9 814              | 0**                | 700 308            | 64 947             | 0**                             |
|                        | 68050              | 3 884 734                       | 3 992              | < 50               | 378 938            | 38 201             | < 50                            |
|                        | 47761              | 11 000 000                      | 10 000             | 0**                | 880 000            | 94 000             | 0**                             |
| dPCR / N-Gen           | 68050              | 4 191 358                       | 5 104              | < 50               | 452 521            | 48 712             | < 50                            |
|                        | 68050              | 5 598 288                       | 5 163              | < 50               | 394 515            | 44 245             | < 50                            |
|                        | 68050              | 5 901 430                       | 5 436              | < 50               | 508 297            | 53 478             | < 50                            |
| dPCR / ORF1b           | 68050              | 2 474 836                       | 2 346              | < 50               | 209 502            | 22 689             | < 50                            |
| dPCR / RdRP-<br>Gen    | 4233               | 361 975                         | 377                | 0**                | 46 224             | 4 620              | 0**                             |

Tabelle 5 (Fortsetzung): Quantitative Ergebnisse - SARS-CoV-2 (RNA) – Meldungen in **Kopien/ml** von 21 Laboren– Parameter 60

| Proben-Nr.             | 340059*,\$         | 340060\$                        | 340061*            | 340062             | 340063*            | 340064*,\$         | 340065                          |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Probeneigenschaft      | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 negativ<br>HCoV OC43 | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 negativ | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 negativ<br>HCoV 229E |
| Verdünnung             | 1 : 1 000*         | 1 : 2 500                       | 1 : 1 000 000*     | ---                | 1 : 10 000*        | 1 : 100 000*       | 1 : 2 500                       |
| Methode /<br>Genregion | <b>Kopien/ml</b>   | <b>Kopien/ml</b>                | <b>Kopien/ml</b>   | <b>Kopien/ml</b>   | <b>Kopien/ml</b>   | <b>Kopien/ml</b>   | <b>Kopien/ml</b>                |
| qPCR / andere          | 2005               | 0**                             | 71 000             | 0**                | 8 700 000          | 810 000            | 0**                             |
|                        | 2362               | 0**                             | 24 000             | 0**                | 4 300 000          | 500 000            | 0**                             |
|                        | 4297               | 0**                             | 7 360              | 0**                | 1 928 160          | 63 540             | 0**                             |
|                        | 5329               | 0**                             | 201 000            | 0**                | 12 400 000         | 1 400 000          | 0**                             |
|                        | 5329               | 0**                             | 87 800             | 0**                | 8 060 000          | 797 000            | 0**                             |
|                        | 5329               | 0**                             | 89 900             | 0**                | 6 560 000          | 656 000            | 0**                             |
|                        | 8705               | 0**                             | 200 000            | 0**                | 800 000            | 400 000            | 0**                             |
|                        | 1056               | 0**                             | 18 000             | 0**                | 2 893 000          | 231 000            | 0**                             |
| qPCR / E-Gen           | 1296               | < 100                           | 1 100              | < 100              | 110 000            | 4 000              | < 100                           |
|                        | 5329               | 0**                             | 88 900             | 0**                | 4 860 000          | 480 000            | 0**                             |
|                        | 41443              | 0**                             | 12 800             | 0**                | 834 000            | 70 800             | 0**                             |
|                        | 67790              | k.A.                            | 219 433            | k.A.               | 28 853 675         | 2 041 466          | k.A.                            |
|                        | 67995              | < 10                            | 20 680             | < 10               | 2 340 710          | 238 120            | < 10                            |
|                        | 68021              | 0**                             | 10 000             | 0**                | 1 000 000          | 100 000            | 0**                             |

Tabelle 5 (Fortsetzung): Quantitative Ergebnisse - SARS-CoV-2 (RNA) – Meldungen in Kopien/ml von 21 Laboren – Parameter 60

| Proben-Nr.          | 340059*,\$         | 340060\$                        | 340061*            | 340062             | 340063*            | 340064*,\$         | 340065                          |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Probeneigenschaft   | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 negativ<br>HCoV OC43 | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 negativ | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 positiv | SARS-CoV-2 negativ<br>HCoV 229E |
| Verdünnung          | 1 : 1 000*         | 1 : 2 500                       | 1 : 1 000 000*     | ---                | 1 : 10 000*        | 1 : 100 000*       | 1 : 2 500                       |
| Methode / Genregion | Teilnehmer- Nr.    | Kopien/ml                       | Kopien/ml          | Kopien/ml          | Kopien/ml          | Kopien/ml          | Kopien/ml                       |
| qPCR / N-Gen        | 1467               | 23 217 000                      | 36 470             | 0**                | 2 921 300          | 338 420            | 0**                             |
|                     | 4973               | 3 811 423                       | 2 687              | < 85               | 319 616            | 22 553             | < 85                            |
|                     | 4973               | 78 599 453                      | 52 326             | < 85               | 7 248 930          | 450 806            | < 85                            |
|                     | 40839              | 644 900                         | 665                | 0**                | 67 540             | 4 857              | 0**                             |
|                     | 58803              | 450 276                         | 478                | 0**                | 64 325             | 4 288              | 0**                             |
| qPCR / ORF1ab       | 67794              | 57 428 571                      | 108 514            | 0**                | 6 857 143          | 819 429            | 0**                             |
|                     | 4973               | 3 330 633                       | 1 857              | < 85               | 285 607            | 18 621             | < 85                            |
|                     | 5329               | 211 000                         | 0**                | 0**                | 37 100             | 5 580              | 0**                             |
| qPCR / RdRP-Gen     | 40839              | 1 580 000                       | 2 140              | 0**                | 188 000            | 17 400             | 0**                             |
|                     | 42366              | 1 083 470                       | 1 110              | 0**                | 61 900             | 5 730              | 0**                             |
| qPCR / S-Gen        | 752                | 5 217 100                       | 17 700             | < 1 000            | 2 567 200          | < 1 000            | 148 900                         |
|                     | 4973               | 2 300 899                       | 2 884              | < 85               | 243 910            | 21 412             | < 85                            |

\*\* Die Angabe "0" repräsentiert Ergebnisanangaben wie "unterhalb Nachweisgrenze" bzw. "negativ". k.A. = keine Angabe

\* Die positiven Proben 340059, 340061, 340063 und 340064 sind Verdünnungsstufen aus einer Verdünnungsreihe eines Lysats von Zellen, die mit SARS-CoV-2 infiziert worden sind (inaktiviert).

,\$ In der Zwischenauswertung vom 17. April 2020 wurden allen Teilnehmern des Extra INSTAND Ringversuchs (340) Virusgenom-Nachweis von SARS-CoV-2 April 2020 die Probeneigenschaften der Proben 340059, 340060 und 340064 vorzeitig mitgeteilt. Die Ergebnisse dieser 3 Proben bleiben für die Erteilung eines Zertifikats unberücksichtigt.

Zur Bewertung für die Erteilung des Zertifikats werden die eingereichten Ergebnisse für die Proben 340061, 340062, 340063 und 340065 berücksichtigt.

Kommentar zum INSTAND e.V. Extra-Ringversuch 340 – April 2020

## 2.4 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

### 2.4.1 Ergebnisse für die vier SARS-CoV-2 positiven Proben

Die SARS-CoV-2 positiven Proben stammen aus einer seriellen Verdünnungsreihe mit SARS-CoV-2:

Probe 340059 (1 : 1 000 verdünnt),

Probe 340063 (1 : 10 000 verdünnt),

Probe 340064 (1 : 100 000 verdünnt) und

Probe 340061 (1 : 1 000 000 verdünnt).

Beachten Sie Abschnitt 3 für eine detaillierte Aufschlüsselung der qualitativen Ergebnisse nach

- Gen-Region,
- Hersteller,
- Testnamen,
- Median von Ct/Cp/Cq/CN-Werten,
- niedrigstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert und
- höchstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert.

#### 2.4.1.1 Qualitative Ergebnisse aufgeschlüsselt nach verwendetem Test und Gen-Region

(siehe Tabelle 3 und Anhang/Abschnitt 3.1)

Für die drei SARS-CoV-2-positiven Proben im Verdünnungsbereich 1: 1 000 bis 1 : 100 000 erbrachten die Tests zum Genom-Nachweis von SARS-CoV-2 unabhängig von der untersuchten Gen-Region überwiegend richtig positive Ergebnisse (93,2% bis 99,7% richtige qualitative Ergebnisse).

ACHTUNG:

Bei Probe 340064 (SARS-CoV-2 positiv 1 : 100 000 verdünnt) beruht die reduzierte Erfolgsquote von nur 93,2 % im Wesentlichen auf falschen Ergebniszusordnungen (Verwechslungen) bei Probe 340064 und Probe 340065 (negativ für SARS-CoV-2 und positiv für HCoV 229E).

Die Verwechslungen bei den Proben 340064 und 340065 betreffen 24 Labore mit insgesamt 59 Ergebnissen je Probe. Siehe dazu auch Abschnitt 2.4.2.1.

Bei der am höchsten verdünnten Probe 340061 (SARS-CoV-2 positiv, 1 : 1 000 000 verdünnt) zeigen sich in den qualitativen Ergebnissen Sensitivitätsunterschiede zwischen den einzelnen Tests. Auffällig ist, dass einzelne Tests, die mehrere Gen-Regionen differenzieren, bei der Erkennung der einzelnen Gen-Regionen unterschiedlich sensitiv sind.

#### 2.4.1.2 Gemeldete Ct/Cp/Cq/CN-Werte aufgeschlüsselt nach Gen-Region

(siehe Tabelle 3 und Anhang/Abschnitt 3.1)

Für jede der vier SARS-CoV-2-positiven Proben lagen die jeweiligen Mediane der Ct/Cp/Cq/CN-Werte unabhängig von der getesteten Gen-Region nahe beieinander

Probe 340059: SARS-CoV-2-positiv, **1 : 1 000 verdünnt** Ct/Cp/Cq/CN-Mediane zwischen 21,8 und 23,8

Probe 340063: SARS-CoV-2-positiv, **1 : 10 000 verdünnt** Ct/Cp/Cq/CN-Mediane zwischen 24,7 und 27,2

Probe 340064: SARS-CoV-2-positiv, **1 : 100 000 verdünnt** Ct/Cp/Cq/CN-Mediane zwischen 28,6 und 30,5

Probe 340061: SARS-CoV-2-positiv, **1 : 1 000 000 verdünnt** Ct/Cp/Cq/CN-Mediane zwischen 31,5 und 33,5

Unter Berücksichtigung des Verdünnungsfaktors von jeweils 10 zwischen den o.g. Proben zeigen die einzelnen Mediane der gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Werte die erwartete Abstufung der Viruskonzentrationen.

Auffällig ist jedoch für alle 4 Proben (bezogen auf die einzelnen Gen-Regionen) die hohe Variabilität der gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Werte (s. Min – Max-Angaben, Tabelle 3). Diese Variabilität betrifft die Tests verschiedener Hersteller unterschiedlich stark. Eine Auswertung mit einer Differenzierung der Ergebnisse nach Gen-Region, Hersteller, Testname, Median der Ct/Cp/Cq/CN-Werte, niedrigstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert und höchstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert findet sich im Anhang/Abschnitt 3.1.

Zur Abklärung der beobachteten Variabilität der Ct/Cp/Cq/CN-Werte bei den einzelnen Testsystemen folgt eine separate Auswertung, um zu zeigen, inwieweit die Schwankungen durch unterschiedliche Extraktionseffizienzen bei den einzelnen Untersuchungen bedingt sind.

Bitte beachten Sie: In diesem Kommentar bleiben die verwendeten Extraktionsmethoden unberücksichtigt.

### **2.4.1.3 Quantitative Ergebnisse**

(siehe Tabellen 4 und 5):

Insgesamt meldeten 21 RV-Teilnehmer quantitative Ergebnisse für jede der vier SARS-CoV-2-positiven Proben (34 quantitative Analysen je Probe). Die Angaben in Tabelle 5 fassen die Ergebnisse zusammen, die mit konventioneller qPCR/NAT und mittels digitaler PCR (dPCR) ermittelt wurden.

Unter Berücksichtigung des Verdünnungsfaktors von jeweils 10 zwischen den vier SARS-CoV-2-positiven Proben zeigen die robusten Mittelwerte (bestimmt nach Algorithmus A/DIN ISO 13528/ Anhang C) die erwartete Abstufung der Viruskonzentrationen.

Der Bewertungsbereich für jede SARS-CoV-2-positive Probe entspricht einem Sollwertbereich, der mit einer zulässigen Abweichung von  $-1.0 \log_{10}$  bis  $+1.0 \log_{10}$  um den Sollwert (Konsenswert bezogen auf die Ergebnisse aller Methoden) festgelegt ist.

#### **2.4.1.3.1 Quantitative Ergebnisse, die mit digitaler PCR (dPCR) ermittelt wurden**

(siehe Tabelle 5)

Insgesamt meldeten drei RV-Teilnehmer quantitative Ergebnisse, die mit digitaler PCR bestimmt wurden, für jede der vier SARS-CoV-2-positiven Proben (8 quantitative Analysen je Probe).

Zusammengefasst für die Gen-Regionen E-Gen, N-Gen, ORF1b wurden mittels dPCR folgende Angaben in Kopien/ml ermittelt:

|                                                                 |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Probe 340059: SARS-CoV-2-positiv, <b>1 : 1 000 verdünnt</b>     | Kopien/ml zwischen | 2 474 836 und 11 000 000 |
| Probe 340063: SARS-CoV-2-positiv, <b>1 : 10 000 verdünnt</b>    | Kopien/ml zwischen | 209 502 und 880 000      |
| Probe 340064: SARS-CoV-2-positiv, <b>1 : 100 000 verdünnt</b>   | Kopien/ml zwischen | 22 689 und 94 000        |
| Probe 340061: SARS-CoV-2-positiv, <b>1 : 1 000 000 verdünnt</b> | Kopien/ml zwischen | 2 346 und 10 000         |

Für die RdRP-Gen-Region wurden mittels dPCR folgende Angaben in Kopien/ml ermittelt:

|                                                                 |           |         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Probe 340059: SARS-CoV-2-positiv, <b>1 : 1 000 verdünnt</b>     | Kopien/ml | 361 975 |
| Probe 340063: SARS-CoV-2-positiv, <b>1 : 10 000 verdünnt</b>    | Kopien/ml | 46 224  |
| Probe 340064: SARS-CoV-2-positiv, <b>1 : 100 000 verdünnt</b>   | Kopien/ml | 4 620   |
| Probe 340061: SARS-CoV-2-positiv, <b>1 : 1 000 000 verdünnt</b> | Kopien/ml | 377     |

Unter Berücksichtigung des Verdünnungsfaktors von jeweils 10 zwischen den vier SARS-CoV-2-positiven Proben geben die dPCR-Ergebnisse insgesamt die erwarteten Konzentrationsabstufungen sehr gut wieder (siehe Tabelle 5). Für die Gen-Regionen E-Gen, N-Gen, ORF1b wurden weiterhin nur geringe Schwankungen zwischen den einzelnen Analysen beobachtet.

Für die RdRP-Gen-Region lagen für jede der vier SARS-CoV-2-positiven Proben die Ergebnisse in Kopien/ml jeweils niedriger als für die Gen-Regionen E-Gen, N-Gen, ORF1b. Der Beobachtung abweichender Ergebnisse wird die Gemeinsame Diagnostikkommission der DVV und GfV zusammen mit dem Nationalen Konsiliarlabor für Coronaviren nachgehen.

## **2.4.2 Ergebnisse für die drei SARS-CoV-2 negativen Proben zur Spezifitätskontrolle der verwendeten SARS-CoV-2 Teste**

Zur Spezifitätskontrolle wurden folgende Proben im Extra-Ringversuch Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2 – April 2020 eingesetzt:

|              |                                                                      |                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Probe 340060 | negativ für SARS-CoV-2<br>positiv für HCoV OC43 (1 : 2 500 verdünnt) | Ct-Werte mit HCoV OC43-spezifischer PCR: 25.8 |
| Probe 340065 | negativ für SARS-CoV-2<br>positiv für HCoV 229E (1 : 2 500 verdünnt) | Ct-Werte mit HCoV 229E-spezifischer PCR: 28.4 |
| Probe 340062 | negativ für SARS-CoV-2<br>MRC-5 Zelllysate                           |                                               |

Beachten Sie Abschnitt 3 für eine detaillierte Aufschlüsselung der qualitativen Ergebnisse nach

- Gen-Region,
- Hersteller und
- Testnamen.

### **2.4.2.1 Qualitative Ergebnisse der drei SARS-CoV-2 negativen Proben, aufgeschlüsselt nach verwendetem Test und Gen-Region**

Für die drei SARS-CoV-2-negativen Proben erbrachten die Tests zum Genom-Nachweis von SARS-CoV-2 unabhängig von der untersuchten Gen-Region überwiegend richtig negative Ergebnisse (92,4% bis 98,6% richtige qualitative Ergebnisse).

#### **ACHTUNG:**

Bei Probe 340065 (negativ für SARS-CoV-2, positiv für HCoV 229E) beruht die reduzierte Erfolgsquote von nur 92,4 % im Wesentlichen auf falschen Ergebniszusammenordnungen (Vertauschungen) bei Probe 340065 und Probe 340064 (positiv für SARS-CoV-2, 1 : 100 000 verdünnt).

Die Vertauschungen bei den Proben 340065 und 340064 betreffen 24 Labore mit insgesamt 59 Ergebnissen je Probe. Siehe dazu auch Abschnitt 2.4.1.1.

Zusätzlich weisen in einigen Fällen die Untersuchungen mit den SARS-CoV-2-negativen Kontrollproben 340060, 340062 und 340065 auf Spezifitätsprobleme hin, die unabhängig von Vertauschungen sind. Es ist abzuklären, ob diese falsch positiven Ergebnisse auf ein Spezifitätsproblem der angewendeten Tests oder auf eine Verschleppung von SARS-CoV-2 bei der Testdurchführung in den betreffenden Laboren zurückzuführen sind.

### **3 Anhang mit Tabellen**

#### **3.1 Qualitativer Genomnachweis von SARS-CoV-2 (Parameter 70)**

### **4 Danksagung**


Herzlich danken wir unserem Kooperationspartner an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und den folgenden INSTAND-Experten-Laboratoren für die Unterstützung bei Einführung von diesem Extra-Ringversuch:

- Charité - Universitätsmedizin Berlin, Institut für Virologie Nationales Konsiliarlaboratorium für Coronaviren, Helmut-Ruska-Haus, Prof. Dr. Christian Drosten, Dr. Victor M. Corman, Dr. Daniela Niemeyer
- Universitätsklinikum Frankfurt, Institut für Medizinische Virologie, Prof. Dr. Sandra Ciesek, Prof. Dr. Holger F. Rabenau, Prof. Dr. Annemarie Berger
- Medizinisches Infektiologiezentrum Berlin, Dr. Martin Obermeier, Dr. Robert Ehret
- Uniklinik Köln, Institut für Virologie, Nationales Referenzzentrum für Papillom- und Polyomaviren, Prof. Dr. Florian Klein, Prof. Dr. Ulrike Wieland, Dr. Steffi Silling, Dr. Rolf Kaiser, Dr. Eva Heger, Dr. Elena Knops

Restproben früherer und des jetzt abgeschlossenen Ringversuches stehen nach wie vor für die Testüberprüfung in der Virusdiagnostik zur Verfügung. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an INSTAND e.V.

Vielen Dank für Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen

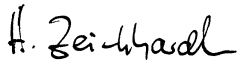

Prof. Dr. Heinz Zeichhardt  
Ringversuchsleiter



Dr. Martin Kammel  
Stellv. Ringversuchsleiter

## Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2 Termin April 2020 - Qualitative Tabellen

### 3 Anhang mit Tabellen

#### 3.1 Qualitativer Genomnachweis von SARS-CoV-2

##### SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ

*Differenzierung nach*

- *Gen-Region,*
- *Hersteller,*
- *Testnamen,*
- *Median von Ct/Cp/Cq/CN-Werten,*
- *niedrigstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert und*
- *höchstem gemeldeten Ct/Cp/Cq/CN-Wert*

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340059 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 1 000 verdünnt**

| Reagenz                                | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=2) | fraglich<br>(N=1) | positiv<br>(N=980) | Probe<br>nicht<br>bewertet | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E-Gen</b>                           |                                                              |                   |                                                  |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ALTONA DIAGNOSTIC                      | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0                           | 48                | 0                                                | 0                 | 48                 |                            | 21.7                      | 18.6                   | 27.6                   |
| ANATOLIA GENEWORKS                     | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 21.5                      | 20.6                   | 29.3                   |
| ANDERE HERSTELLER                      |                                                              | 10                | 0                                                | 0                 | 10                 |                            | 24.1                      | 22.7                   | 27.0                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS             | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  |                            |                           |                        |                        |
| CEPHEID                                | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 11                | 0                                                | 0                 | 11                 |                            | 21.5                      | 21.0                   | 24.3                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)              |                                                              | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG                     |                                                              | 47                | 0                                                | 0                 | 47                 |                            | 22.5                      | 16.8                   | 34.0                   |
| ELITech                                | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 8                 | 0                                                | 0                 | 8                  |                            | 21.1                      | 18.4                   | 26.8                   |
| EURO IMMUN                             | EUORealTime SARS-CoV-2                                       | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 23.9                      | 23.9                   | 23.9                   |
| EUROFINS TECHNOLOGIES                  | VirSeek SARS-CoV-2 Screen                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 28.2                      | 28.2                   | 28.2                   |
| GENETIC SIGNATURES                     | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 23.2                      | 23.2                   | 23.2                   |
| GERBION                                | viarellaSARS-CoV-2 seqc                                      | 5                 | 0                                                | 0                 | 5                  |                            | 23.0                      | 22.4                   | 24.0                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK                        | MutaPLEX Coronavirus                                         | 5                 | 0                                                | 0                 | 5                  |                            | 24.4                      | 22.5                   | 25.4                   |
| LIFERIVER                              | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            | 21.6                      | 17.0                   | 22.0                   |
| LUMINEX                                | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 23.0                      | 23.0                   | 23.0                   |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            | 22.8                      | 20.6                   | 25.0                   |
| Priv. Inst. f. Immunol. u. Mol.genetik | AmpliGnost CoV-2 E-Gen                                       | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 20.7                      | 19.1                   | 22.2                   |
| QIAGEN                                 | QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel                       | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            | 23.6                      | 18.4                   | 26.7                   |
| R-BIOPHARM                             | RIDA GENE SARS-CoV-2 RUO                                     | 55                | 0                                                | 0                 | 55                 |                            | 23.2                      | 17.7                   | 26.2                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS                      | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 39                | 0                                                | 0                 | 39                 |                            | 22.8                      | 21.1                   | 29.4                   |
| SEEGENE                                | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 51                | 0                                                | 0                 | 51                 |                            | 21.3                      | 18.0                   | 28.7                   |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV E-gene                   | 68                | 0                                                | 0                 | 68                 |                            | 22.9                      | 19.2                   | 29.5                   |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Sarbeco E-gene                                      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 23.4                      | 23.4                   | 23.4                   |
|                                        |                                                              | <b>373</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>          | <b>373</b>         |                            | <b>22.6</b>               | <b>16.8</b>            | <b>34.0</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp Median", "Ct/Cp Min" und "Ct/Cp Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340059 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 1 000 verdünnt**

| Reagenz                   | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=2) | fraglich<br>(N=1) | positiv<br>(N=980) | Probe<br>nicht<br>bewertet | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>N-Gen</b>              |                                                              |                   |                                                  |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ABBOTT                    | RealTime SARS-CoV-2                                          | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            |                           |                        |                        |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 10                | 0                                                | 0                 | 10                 |                            | 24.6                      | 20.1                   | 34.9                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 20.0                      | 17.9                   | 20.5                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  |                            | 20.0                      | 18.4                   | 21.6                   |
| CEPHEID                   | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 12                | 0                                                | 0                 | 12                 |                            | 23.7                      | 22.8                   | 26.9                   |
| CERTEST BIOTEC            | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 23.2                      | 21.0                   | 25.7                   |
| CLONIT                    | quanti COVID-19 Kit                                          | 4                 | 1                                                | 0                 | 3                  |                            | 21.0                      | 19.3                   | 22.6                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR) |                                                              | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG        |                                                              | 33                | 0                                                | 0                 | 33                 |                            | 24.5                      | 19.9                   | 31.8                   |
| ELITech                   | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 0                                                | 0                 | 9                  |                            | 22.2                      | 18.7                   | 27.9                   |
| EURO IMMUN                | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 21.3                      | 21.3                   | 21.3                   |
| GENEMATRIX                | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 23.5                      | 22.0                   | 25.9                   |
| GENETIC SIGNATURES        | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 23.3                      | 23.3                   | 23.3                   |
| INGENETIX                 | ViroReal SARS-CoV-2 & SARS                                   | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            | 23.4                      | 23.3                   | 24.8                   |
| LIFERIVER                 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 1                                                | 0                 | 2                  |                            | 20.4                      | 18.0                   | 22.8                   |
| LUMINEX                   | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| NEUMODX                   | NeuMoDx SARS-CoV-2 Assay                                     | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            | 19.9                      | 19.3                   | 20.4                   |
| PATHOFINDER               | RealAccurate Quadruplex Corona-plus PCR Kit                  | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            | 23.6                      | 20.7                   | 24.2                   |
| SEEGENE                   | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 52                | 0                                                | 0                 | 52                 |                            | 23.2                      | 20.0                   | 31.0                   |
| TIB MOLBIOL               | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV N-gene                   | 13                | 0                                                | 0                 | 13                 |                            | 29.4                      | 27.4                   | 34.5                   |
| VITASSAY                  | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 24.6                      | 24.6                   | 24.6                   |
|                           |                                                              | <b>167</b>        | <b>2</b>                                         | <b>0</b>          | <b>165</b>         |                            | <b>23.6</b>               | <b>17.9</b>            | <b>34.9</b>            |
| <b>ORF1a</b>              |                                                              |                   |                                                  |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 24.4                      | 24.4                   | 24.4                   |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 3                 | 0                                                | 1                 | 2                  |                            | 23.3                      | 21.7                   | 24.1                   |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 10                | 0                                                | 0                 | 10                 |                            | 22.1                      | 20.8                   | 25.3                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS         | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 32                | 0                                                | 0                 | 32                 |                            | 22.2                      | 21.7                   | 28.7                   |
|                           |                                                              | <b>46</b>         | <b>0</b>                                         | <b>1</b>          | <b>45</b>          |                            | <b>22.2</b>               | <b>20.8</b>            | <b>28.7</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp Median", "Ct/Cp Min" und "Ct/Cp Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340059 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 1 000 verdünnt**

| Reagenz                    | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=2) | fraglich<br>(N=1) | positiv<br>(N=980) | Probe<br>nicht<br>bewertet | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ORF1ab</b>              |                                                              |                   |                                                  |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ANATOLIA GENEWORKS         | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 5                 | 0                                                | 0                 | 5                  |                            | 22.3                      | 19.7                   | 27.5                   |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 9                 | 0                                                | 0                 | 9                  |                            | 23.1                      | 10.9                   | 29.1                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 20.0                      | 19.5                   | 20.9                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  |                            | 18.8                      | 16.8                   | 20.8                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            |                           |                        |                        |
| CERTEST BIOTEC             | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 7                 | 0                                                | 0                 | 7                  |                            | 21.5                      | 18.8                   | 26.2                   |
| DIASORIN                   | Simplexa COVID-19 Direct Kit                                 | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 19.3                      | 19.1                   | 19.8                   |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 6                 | 0                                                | 0                 | 6                  |                            | 25.2                      | 21.4                   | 28.4                   |
| LIFERIVER                  | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            | 23.0                      | 18.0                   | 23.0                   |
| LUMINEX                    | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| ROCHE DIAGNOSTICS          | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 21.8                      | 21.8                   | 21.8                   |
| VITASSAY                   | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  |                            | 22.7                      | 22.4                   | 23.0                   |
|                            |                                                              | <b>48</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>          | <b>48</b>          |                            | <b>21.8</b>               | <b>10.9</b>            | <b>29.1</b>            |
| <b>RdRP-Gen</b>            |                                                              |                   |                                                  |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ABACUS DIAGNOSTICA         | GenomEra Coronavirus SARS-CoV-2                              | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| ABBOTT                     | RealTime SARS-CoV-2                                          | 6                 | 0                                                | 0                 | 6                  |                            | 10.6                      | 10.0                   | 14.5                   |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 10                | 0                                                | 0                 | 10                 |                            | 23.6                      | 21.8                   | 32.1                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)  |                                                              | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 42                | 0                                                | 0                 | 42                 |                            | 25.1                      | 19.6                   | 34.5                   |
| ELITech                    | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 0                                                | 0                 | 9                  |                            | 23.2                      | 21.0                   | 28.2                   |
| EUROFINS TECHNOLOGIES      | VirSeek SARS-CoV-2 Ident                                     | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| GENEMATRIX                 | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 25.1                      | 23.0                   | 28.6                   |
| GENESIG                    | Coronavirus COVID-19                                         | 5                 | 0                                                | 0                 | 5                  |                            | 25.4                      | 23.5                   | 30.1                   |
| GERBION                    | virellaSARS-CoV-2 seqc                                       | 5                 | 0                                                | 0                 | 5                  |                            | 25.8                      | 25.2                   | 27.9                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK            | MutaPLEX Coronavirus                                         | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 24.6                      | 21.7                   | 27.8                   |
| SEEGENE                    | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 57                | 0                                                | 0                 | 57                 |                            | 23.0                      | 20.7                   | 30.2                   |
| TIB MOLBIOL                | LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gene                         | 40                | 0                                                | 0                 | 40                 |                            | 27.1                      | 21.5                   | 34.4                   |
|                            |                                                              | <b>185</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>          | <b>185</b>         |                            | <b>23.8</b>               | <b>10.0</b>            | <b>34.5</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp Median", "Ct/Cp Min" und "Ct/Cp Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340059 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 1 000 verdünnt**

| Reagenz                                                 | Testkit                            | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=2) | fraglich<br>(N=1) | positiv<br>(N=980) | Probe<br>nicht<br>bewertet | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>S-Gen</b>                                            |                                    |                   |                                                  |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 61                | 0                                                | 0                 | 61                 |                            | 21.3                      | 17.5                   | 24.4                   |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 20.0                      | 18.6                   | 21.1                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit        | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  |                            | 19.4                      | 18.4                   | 20.4                   |
| CERTEST BIOTEC                                          | VIASURE SARS-CoV-2 S gene          | 26                | 0                                                | 0                 | 26                 |                            | 24.8                      | 23.2                   | 26.1                   |
| DIASORIN                                                | Simplexa COVID-19 Direct Kit       | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 19.3                      | 18.7                   | 19.9                   |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 22.2                      | 22.2                   | 22.2                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK                                         | MutaPLEX Coronavirus               | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 27.8                      | 27.8                   | 27.8                   |
|                                                         |                                    | <b>100</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>          | <b>100</b>         |                            | <b>21.8</b>               | <b>17.5</b>            | <b>27.8</b>            |
| <b>Genregion von den Teilnehmern nicht spezifiziert</b> |                                    |                   |                                                  |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ABBOTT                                                  | RealTime SARS-CoV-2                | 9                 | 0                                                | 0                 | 9                  |                            | 11.6                      | 9.9                    | 13.9                   |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 24.0                      | 24.0                   | 24.0                   |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 14                | 0                                                | 0                 | 14                 |                            | 22.5                      | 9.4                    | 26.0                   |
| ANICON                                                  | Kylo SARS-CoV-2 Confirmation RTU   | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            | 25.3                      | 21.2                   | 27.5                   |
| ANICON                                                  | Kylo SARS-CoV-2 Screening RTU      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 25.4                      | 25.4                   | 25.4                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  |                            | 21.1                      | 21.1                   | 21.1                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS                              | Vivalytic VRI Multiplex Test       | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  |                            |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            | 22.7                      | 22.0                   | 25.1                   |
| EURO IMMUN                                              | EURORealTime SARS-CoV-2            | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 23.9                      | 22.7                   | 27.4                   |
| FAST-TRACK DIAGNOSTICS                                  | FTD SARS-CoV-2 assay               | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  |                            | 22.4                      | 20.7                   | 24.5                   |
| GENESIG                                                 | Coronavirus COVID-19               | 6                 | 0                                                | 0                 | 6                  |                            | 27.7                      | 25.4                   | 33.0                   |
| GERBION                                                 | virellaSARS-CoV-2 seqc             | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  |                            | 23.7                      | 22.7                   | 24.7                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS                                       | COBAS SARS-CoV-2 Test              | 11                | 0                                                | 0                 | 11                 |                            | 22.0                      | 18.7                   | 27.2                   |
| SEEGENE                                                 | Allplex 2019 n-CoV Assay           | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  |                            | 20.8                      | 20.0                   | 23.9                   |
|                                                         |                                    | <b>64</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>          | <b>64</b>          |                            | <b>22.6</b>               | <b>9.4</b>             | <b>33.0</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2  
Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340060 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
positiv für HCoV OC43 1 : 2 500 verdünnt, Spezifitätskontrolle**

| Reagenz                                | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=961) | fraglich<br>(N=9) | positiv<br>(N=8) | Probe<br>nicht<br>bewertet |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| <b>E-Gen</b>                           |                                                              |                   |                                                    |                   |                  |                            |
| ALTONA DIAGNOSTIC                      | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0                           | 48                | 48                                                 | 0                 | 0                |                            |
| ANATOLIA GENEWORKS                     | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 4                 | 3                                                  | 0                 | 1                |                            |
| ANDERE HERSTELLER                      |                                                              | 10                | 10                                                 | 0                 | 0                |                            |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS             | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                |                            |
| CEPHEID                                | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 11                | 11                                                 | 0                 | 0                |                            |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)              |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| EIGENE HERSTELLUNG                     |                                                              | 47                | 47                                                 | 0                 | 0                |                            |
| ELITech                                | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 8                 | 7                                                  | 1                 | 0                |                            |
| EURO IMMUN                             | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| EUROFINS TECHNOLOGIES                  | VirSeek SARS-CoV-2 Screen                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| GENETIC SIGNATURES                     | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| GERBION                                | virellaSARS-CoV-2 seqc                                       | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                |                            |
| IMMUNDIAGNOSTIK                        | MutaPLEX Coronavirus                                         | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                |                            |
| LIFERIVER                              | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| LUMINEX                                | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| Priv. Inst. f. Immunol. u. Mol.genetik | AmpliGnost CoV-2 E-Gen                                       | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                |                            |
| QIAGEN                                 | QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel                       | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| R-BIOPHARM                             | RIDA GENE SARS-CoV-2 RUO                                     | 55                | 54                                                 | 0                 | 1                |                            |
| ROCHE DIAGNOSTICS                      | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 39                | 39                                                 | 0                 | 0                |                            |
| SEEGENE                                | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 51                | 51                                                 | 0                 | 0                |                            |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV E-gene                   | 68                | 66                                                 | 1                 | 1                |                            |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Sarbeco E-gene                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
|                                        |                                                              | <b>373</b>        | <b>368</b>                                         | <b>2</b>          | <b>3</b>         |                            |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340060 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
 positiv für HCoV OC43 1 : 2 500 verdünnt, Spezifitätskontrolle**

| Reagenz                   | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=961) | fraglich<br>(N=9) | positiv<br>(N=8) | Probe<br>nicht<br>bewertet |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| <b>N-Gen</b>              |                                                              |                   |                                                    |                   |                  |                            |
| ABBOTT                    | RealTime SARS-CoV-2                                          | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 10                | 10                                                 | 0                 | 0                |                            |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 3                                                  | 1                 | 0                |                            |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                |                            |
| CEPHEID                   | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 12                | 12                                                 | 0                 | 0                |                            |
| CERTEST BIOTEC            | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                |                            |
| CLONIT                    | quanti COVID-19 Kit                                          | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                |                            |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR) |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| EIGENE HERSTELLUNG        |                                                              | 33                | 33                                                 | 0                 | 0                |                            |
| ELITech                   | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 8                                                  | 1                 | 0                |                            |
| EURO IMMUN                | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| GENEMATRIX                | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                |                            |
| GENETIC SIGNATURES        | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| INGENETIX                 | ViroReal SARS-CoV-2 & SARS                                   | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| LIFERIVER                 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| LUMINEX                   | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| NEUMODX                   | NeuMoDx SARS-CoV-2 Assay                                     | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| PATHOFINDER               | RealAccurate Quadruplex Corona-plus PCR Kit                  | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| SEEGENE                   | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 52                | 50                                                 | 0                 | 2                |                            |
| TIB MOLBIOL               | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV N-gene                   | 12                | 12                                                 | 0                 | 0                |                            |
| VITASSAY                  | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
|                           |                                                              | <b>166</b>        | <b>162</b>                                         | <b>2</b>          | <b>2</b>         |                            |
| <b>ORF1a</b>              |                                                              |                   |                                                    |                   |                  |                            |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 10                | 9                                                  | 0                 | 1                |                            |
| ROCHE DIAGNOSTICS         | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 32                | 32                                                 | 0                 | 0                |                            |
|                           |                                                              | <b>46</b>         | <b>45</b>                                          | <b>0</b>          | <b>1</b>         |                            |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340060 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
 positiv für HCoV OC43 1 : 2 500 verdünnt, Spezifitätskontrolle**

| Reagenz                    | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=961) | fraglich<br>(N=9) | positiv<br>(N=8) | Probe<br>nicht<br>bewertet |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| <b>ORF1ab</b>              |                                                              |                   |                                                    |                   |                  |                            |
| ANATOLIA GENEWORKS         | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 5                 | 4                                                  | 0                 | 1                |                            |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 9                 | 9                                                  | 0                 | 0                |                            |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 3                                                  | 1                 | 0                |                            |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                |                            |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 4                 | 3                                                  | 0                 | 1                |                            |
| CERTEST BIOTEC             | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 7                 | 7                                                  | 0                 | 0                |                            |
| DIASORIN                   | Simplexa COVID-19 Direct Kit                                 | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                |                            |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 6                 | 6                                                  | 0                 | 0                |                            |
| LIFERIVER                  | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| LUMINEX                    | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| ROCHE DIAGNOSTICS          | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| VITASSAY                   | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                |                            |
|                            |                                                              | <b>48</b>         | <b>45</b>                                          | <b>1</b>          | <b>2</b>         |                            |
| <b>RdRP-Gen</b>            |                                                              |                   |                                                    |                   |                  |                            |
| ABACUS DIAGNOSTICA         | GenomEra Coronavirus SARS-CoV-2                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| ABBOTT                     | RealTime SARS-CoV-2                                          | 6                 | 6                                                  | 0                 | 0                |                            |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 10                | 9                                                  | 1                 | 0                |                            |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)  |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 41                | 40                                                 | 1                 | 0                |                            |
| ELITech                    | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 8                                                  | 1                 | 0                |                            |
| EUROFINS TECHNOLOGIES      | VirSeek SARS-CoV-2 Ident                                     | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| GENEMATRIX                 | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                |                            |
| GENESIG                    | Coronavirus COVID-19                                         | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                |                            |
| GERBION                    | virellaSARS-CoV-2 seqc                                       | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                |                            |
| IMMUNDIAGNOSTIK            | MutaPLEX Coronavirus                                         | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                |                            |
| SEEGENE                    | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 57                | 57                                                 | 0                 | 0                |                            |
| TIB MOLBIOL                | LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gene                         | 37                | 37                                                 | 0                 | 0                |                            |
|                            |                                                              | <b>181</b>        | <b>178</b>                                         | <b>3</b>          | <b>0</b>         |                            |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2  
Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340060 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
positiv für HCoV OC43 1 : 2 500 verdünnt, Spezifitätskontrolle**

| Reagenz                                                 | Testkit                            | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=961) | fraglich<br>(N=9) | positiv<br>(N=8) | Probe<br>nicht<br>bewertet |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
| <b>S-Gen</b>                                            |                                    |                   |                                                    |                   |                  |                            |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 61                | 61                                                 | 0                 | 0                |                            |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 4                 | 3                                                  | 1                 | 0                |                            |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit        | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                |                            |
| CERTEST BIOTEC                                          | VIASURE SARS-CoV-2 S gene          | 26                | 26                                                 | 0                 | 0                |                            |
| DIASORIN                                                | Simplexa COVID-19 Direct Kit       | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                |                            |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| IMMUNDIAGNOSTIK                                         | MutaPLEX Coronavirus               | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
|                                                         |                                    | <b>100</b>        | <b>99</b>                                          | <b>1</b>          | <b>0</b>         |                            |
| <b>Genregion von den Teilnehmern nicht spezifiziert</b> |                                    |                   |                                                    |                   |                  |                            |
| ABBOTT                                                  | RealTime SARS-CoV-2                | 9                 | 9                                                  | 0                 | 0                |                            |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 14                | 14                                                 | 0                 | 0                |                            |
| ANICON                                                  | KyIt SARS-CoV-2 Confirmation RTU   | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| ANICON                                                  | KyIt SARS-CoV-2 Screening RTU      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                |                            |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS                              | Vivalytic VRI Multiplex Test       | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                |                            |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
| EURO IMMUN                                              | EURORealTime SARS-CoV-2            | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                |                            |
| FAST-TRACK DIAGNOSTICS                                  | FTD SARS-CoV-2 assay               | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                |                            |
| GENESIG                                                 | Coronavirus COVID-19               | 6                 | 6                                                  | 0                 | 0                |                            |
| GERBION                                                 | virellaSARS-CoV-2 seqc             | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                |                            |
| ROCHE DIAGNOSTICS                                       | COBAS SARS-CoV-2 Test              | 11                | 11                                                 | 0                 | 0                |                            |
| SEEGENE                                                 | Allplex 2019 n-CoV Assay           | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                |                            |
|                                                         |                                    | <b>64</b>         | <b>64</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |                            |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340061 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 1 000 000 verd.**

| Reagenz                                | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=58) | fraglich<br>(N=11) | positiv<br>(N=914) | Quote<br>(93%) | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E-Gen</b>                           |                                                              |                   |                                                   |                    |                    |                |                           |                        |                        |
| ALTONA DIAGNOSTIC                      | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0                           | 48                | 0                                                 | 0                  | 48                 | 100,00%        | 31.7                      | 28.7                   | 36.0                   |
| ANATOLIA GENEWORKS                     | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 4                 | 1                                                 | 0                  | 3                  | 75,00%         | 29.4                      | 28.5                   | 30.2                   |
| ANDERE HERSTELLER                      |                                                              | 10                | 0                                                 | 0                  | 10                 | 100,00%        | 33.0                      | 32.4                   | 36.5                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS             | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 2                 | 0                                                 | 0                  | 2                  | 100,00%        |                           |                        |                        |
| CEPHEID                                | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 11                | 0                                                 | 0                  | 11                 | 100,00%        | 31.1                      | 30.5                   | 35.1                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)              |                                                              | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 97,87%         |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG                     |                                                              | 47                | 1                                                 | 0                  | 46                 | 100,00%        | 32.9                      | 25.7                   | 37.5                   |
| ELITech                                | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 8                 | 2                                                 | 0                  | 6                  | 75,00%         | 31.2                      | 30.4                   | 35.5                   |
| EURO IMMUN                             | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 33.7                      | 33.7                   | 33.7                   |
| EUROFINS TECHNOLOGIES                  | VirSeek SARS-CoV-2 Screen                                    | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 35.5                      | 35.5                   | 35.5                   |
| GENETIC SIGNATURES                     | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 32.2                      | 32.2                   | 32.2                   |
| GERBION                                | viellaSARS-CoV-2 seqc                                        | 5                 | 0                                                 | 0                  | 5                  | 100,00%        | 33.0                      | 31.8                   | 33.0                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK                        | MutaPLEX Coronavirus                                         | 5                 | 1                                                 | 0                  | 4                  | 80,00%         | 33.5                      | 31.4                   | 37.9                   |
| LIFERIVER                              | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 0                                                 | 0                  | 3                  | 100,00%        | 30.0                      | 27.0                   | 30.5                   |
| LUMINEX                                | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        |                           |                        |                        |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 32.0                      | 32.0                   | 32.0                   |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 3                 | 0                                                 | 0                  | 3                  | 100,00%        | 31.4                      | 30.8                   | 35.3                   |
| Priv. Inst. f. Immunol. u. Mol.genetik | AmpliGnost CoV-2 E-Gen                                       | 4                 | 0                                                 | 0                  | 4                  | 100,00%        | 29.9                      | 28.0                   | 32.2                   |
| QIAGEN                                 | QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel                       | 3                 | 0                                                 | 0                  | 3                  | 100,00%        | 33.6                      | 28.1                   | 38.6                   |
| R-BIOPHARM                             | RIDA GENE SARS-CoV-2 RUO                                     | 55                | 1                                                 | 0                  | 54                 | 98,18%         | 33.3                      | 15.0                   | 37.1                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS                      | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 39                | 0                                                 | 0                  | 39                 | 100,00%        | 32.4                      | 30.5                   | 34.9                   |
| SEEGENE                                | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 51                | 0                                                 | 1                  | 50                 | 98,04%         | 31.1                      | 19.2                   | 36.3                   |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV E-gene                   | 68                | 2                                                 | 0                  | 66                 | 97,06%         | 32.7                      | 29.6                   | 40.0                   |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Sarbeco E-gene                                      | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 32.0                      | 32.0                   | 32.0                   |
|                                        |                                                              | <b>373</b>        | <b>8</b>                                          | <b>1</b>           | <b>364</b>         | <b>97,59%</b>  | <b>32.1</b>               | <b>15.0</b>            | <b>40.0</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp Median", "Ct/Cp Min" und "Ct/Cp Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340061 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 1 000 000 verd.**

| Reagenz                   | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=58) | fraglich<br>(N=11) | positiv<br>(N=914) | Quote<br>(93%) | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>N-Gen</b>              |                                                              |                   |                                                   |                    |                    |                |                           |                        |                        |
| ABBOTT                    | RealTime SARS-CoV-2                                          | 3                 | 0                                                 | 0                  | 3                  | 100,00%        |                           |                        |                        |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 10                | 1                                                 | 1                  | 8                  | 80,00%         | 33.2                      | 29.3                   | 38.4                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 0                                                 | 0                  | 4                  | 100,00%        | 27.9                      | 20.0                   | 30.0                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 0                                                 | 0                  | 2                  | 100,00%        | 30.4                      | 29.2                   | 31.5                   |
| CEPHEID                   | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 12                | 0                                                 | 0                  | 12                 | 100,00%        | 33.8                      | 33.1                   | 38.2                   |
| CERTEST BIOTEC            | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 4                 | 0                                                 | 0                  | 4                  | 100,00%        | 32.6                      | 31.0                   | 36.4                   |
| CLONIT                    | quanti COVID-19 Kit                                          | 4                 | 1                                                 | 0                  | 3                  | 75,00%         | 31.8                      | 29.6                   | 34.0                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR) |                                                              | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG        |                                                              | 33                | 3                                                 | 0                  | 30                 | 90,91%         | 33.5                      | 30.1                   | 40.7                   |
| ELITech                   | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 0                                                 | 0                  | 9                  | 100,00%        | 32.1                      | 28.8                   | 37.5                   |
| EURO IMMUN                | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 30.7                      | 30.7                   | 30.7                   |
| GENEMATRIX                | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 0                                                 | 0                  | 4                  | 100,00%        | 34.5                      | 33.0                   | 37.9                   |
| GENETIC SIGNATURES        | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 33.5                      | 33.5                   | 33.5                   |
| INGENETIX                 | ViroReal SARS-CoV-2 & SARS                                   | 3                 | 0                                                 | 0                  | 3                  | 100,00%        | 33.3                      | 32.9                   | 34.6                   |
| LIFERIVER                 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 2                                                 | 0                  | 1                  | 33,33%         | 32.6                      | 32.6                   | 32.6                   |
| LUMINEX                   | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        |                           |                        |                        |
| NEUMODX                   | NeuMoDx SARS-CoV-2 Assay                                     | 3                 | 0                                                 | 0                  | 3                  | 100,00%        | 29.7                      | 29.5                   | 29.9                   |
| PATHOFINDER               | RealAccurate Quadruplex Corona-plus PCR Kit                  | 3                 | 0                                                 | 0                  | 3                  | 100,00%        | 33.1                      | 30.2                   | 33.6                   |
| SEEGENE                   | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 52                | 1                                                 | 1                  | 50                 | 96,15%         | 33.1                      | 21.5                   | 37.1                   |
| TIB MOLBIOL               | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV N-gene                   | 13                | 3                                                 | 1                  | 9                  | 69,23%         | 38.2                      | 35.9                   | 40.0                   |
| VITASSAY                  | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 33.5                      | 33.5                   | 33.5                   |
|                           |                                                              | <b>167</b>        | <b>11</b>                                         | <b>3</b>           | <b>153</b>         | <b>91,62%</b>  | <b>33.3</b>               | <b>20.0</b>            | <b>40.7</b>            |
| <b>ORF1a</b>              |                                                              |                   |                                                   |                    |                    |                |                           |                        |                        |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 34.2                      | 34.2                   | 34.2                   |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 3                 | 0                                                 | 1                  | 2                  | 66,67%         | 34.5                      | 31.9                   | 34.7                   |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 10                | 1                                                 | 0                  | 9                  | 90,00%         | 31.9                      | 30.6                   | 34.1                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS         | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 32                | 0                                                 | 0                  | 32                 | 100,00%        | 31.7                      | 31.1                   | 36.0                   |
|                           |                                                              | <b>46</b>         | <b>1</b>                                          | <b>1</b>           | <b>44</b>          | <b>95,65%</b>  | <b>31.7</b>               | <b>30.6</b>            | <b>36.0</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340061 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 1 000 000 verd.**

| Reagenz                    | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=58) | fraglich<br>(N=11) | positiv<br>(N=914) | Quote<br>(93%) | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ORF1ab</b>              |                                                              |                   |                                                   |                    |                    |                |                           |                        |                        |
| ANATOLIA GENEWORKS         | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 5                 | 1                                                 | 0                  | 4                  | 80,00%         | 31.3                      | 26.3                   | 31.6                   |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 9                 | 0                                                 | 2                  | 7                  | 77,78%         | 32.8                      | 21.7                   | 39.3                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 0                                                 | 0                  | 4                  | 100,00%        | 29.8                      | 20.0                   | 30.8                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 0                                                 | 0                  | 2                  | 100,00%        | 29.6                      | 28.7                   | 30.4                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 4                 | 1                                                 | 0                  | 3                  | 75,00%         |                           |                        |                        |
| CERTEST BIOTEC             | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 7                 | 1                                                 | 0                  | 6                  | 85,71%         | 31.3                      | 30.2                   | 36.3                   |
| DIASORIN                   | Simplexa COVID-19 Direct Kit                                 | 4                 | 0                                                 | 0                  | 4                  | 100,00%        | 29.2                      | 29.0                   | 29.7                   |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 6                 | 1                                                 | 0                  | 5                  | 83,33%         | 35.2                      | 31.4                   | 36.9                   |
| LIFERIVER                  | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 0                                                 | 0                  | 3                  | 100,00%        | 32.0                      | 32.0                   | 32.1                   |
| LUMINEX                    | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        |                           |                        |                        |
| ROCHE DIAGNOSTICS          | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 31.3                      | 31.3                   | 31.3                   |
| VITASSAY                   | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 2                 | 0                                                 | 0                  | 2                  | 100,00%        | 32.4                      | 32.0                   | 32.8                   |
|                            |                                                              | <b>48</b>         | <b>4</b>                                          | <b>2</b>           | <b>42</b>          | <b>87,50%</b>  | <b>31.5</b>               | <b>20.0</b>            | <b>39.3</b>            |
| <b>RdRP-Gen</b>            |                                                              |                   |                                                   |                    |                    |                |                           |                        |                        |
| ABACUS DIAGNOSTICA         | GenomEra Coronavirus SARS-CoV-2                              | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        |                           |                        |                        |
| ABBOTT                     | RealTime SARS-CoV-2                                          | 6                 | 0                                                 | 0                  | 6                  | 100,00%        | 20.5                      | 19.5                   | 23.7                   |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 90,00%         | 32.1                      | 31.0                   | 39.3                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)  |                                                              | 10                | 1                                                 | 0                  | 9                  | 100,00%        |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 42                | 3                                                 | 0                  | 39                 | 92,86%         | 34.2                      | 29.9                   | 42.8                   |
| ELITech                    | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 4                                                 | 1                  | 4                  | 44,44%         | 35.2                      | 35.0                   | 35.4                   |
| EUROFINS TECHNOLOGIES      | VirSeek SARS-CoV-2 Ident                                     | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        |                           |                        |                        |
| GENEMATRIX                 | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 1                                                 | 0                  | 3                  | 75,00%         | 35.4                      | 34.0                   | 40.3                   |
| GENESIG                    | Coronavirus COVID-19                                         | 5                 | 0                                                 | 1                  | 4                  | 80,00%         | 35.4                      | 33.0                   | 38.3                   |
| GERBION                    | virellaSARS-CoV-2 seqc                                       | 5                 | 3                                                 | 0                  | 2                  | 40,00%         | 36.1                      | 35.9                   | 36.3                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK            | MutaPLEX Coronavirus                                         | 4                 | 2                                                 | 0                  | 2                  | 50,00%         | 34.0                      | 31.7                   | 36.3                   |
| SEEGENE                    | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 57                | 1                                                 | 1                  | 55                 | 96,49%         | 33.0                      | 20.8                   | 38.6                   |
| TIB MOLBIOL                | LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gene                         | 40                | 8                                                 | 1                  | 31                 | 77,50%         | 35.6                      | 31.5                   | 40.2                   |
|                            |                                                              | <b>185</b>        | <b>23</b>                                         | <b>4</b>           | <b>158</b>         | <b>85,41%</b>  | <b>33.5</b>               | <b>19.5</b>            | <b>42.8</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340061 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 1 000 000 verd.**

| Reagenz                                                 | Testkit                            | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=58) | fraglich<br>(N=11) | positiv<br>(N=914) | Quote<br>(93%) | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>S-Gen</b>                                            |                                    |                   |                                                   |                    |                    |                |                           |                        |                        |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 61                | 0                                                 | 0                  | 61                 | 100,00%        | 31.0                      | 27.5                   | 34.6                   |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        |                           |                        |                        |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 4                 | 1                                                 | 0                  | 3                  | 75,00%         | 28.3                      | 20.0                   | 30.7                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit        | 2                 | 0                                                 | 0                  | 2                  | 100,00%        | 26.1                      | 22.6                   | 29.6                   |
| CERTEST BIOTEC                                          | VIASURE SARS-CoV-2 S gene          | 26                | 2                                                 | 0                  | 24                 | 92,31%         | 34.7                      | 32.2                   | 39.0                   |
| DIASORIN                                                | Simplexa COVID-19 Direct Kit       | 4                 | 0                                                 | 0                  | 4                  | 100,00%        | 29.2                      | 28.4                   | 30.2                   |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 32.0                      | 32.0                   | 32.0                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK                                         | MutaPLEX Coronavirus               | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 36.3                      | 36.3                   | 36.3                   |
|                                                         |                                    | <b>100</b>        | <b>3</b>                                          | <b>0</b>           | <b>97</b>          | <b>97,00%</b>  | <b>31.5</b>               | <b>20.0</b>            | <b>39.0</b>            |
| <b>Genregion von den Teilnehmern nicht spezifiziert</b> |                                    |                   |                                                   |                    |                    |                |                           |                        |                        |
| ABBOTT                                                  | RealTime SARS-CoV-2                | 9                 | 0                                                 | 0                  | 9                  | 100,00%        | 21.6                      | 19.7                   | 23.8                   |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 34.0                      | 34.0                   | 34.0                   |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 14                | 1                                                 | 0                  | 13                 | 92,86%         | 32.2                      | 19.3                   | 36.0                   |
| ANICON                                                  | KyIt SARS-CoV-2 Confirmation RTU   | 3                 | 1                                                 | 0                  | 2                  | 66,67%         | 33.1                      | 31.3                   | 34.8                   |
| ANICON                                                  | KyIt SARS-CoV-2 Screening RTU      | 1                 | 1                                                 | 0                  | 0                  | 0,00%          |                           |                        |                        |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 1                 | 0                                                 | 0                  | 1                  | 100,00%        | 32.2                      | 32.2                   | 32.2                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS                              | Vivalytic VRI Multiplex Test       | 2                 | 1                                                 | 0                  | 1                  | 50,00%         |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 3                 | 0                                                 | 0                  | 3                  | 100,00%        | 33.2                      | 31.9                   | 35.0                   |
| EURO IMMUN                                              | EURORealTime SARS-CoV-2            | 4                 | 0                                                 | 0                  | 4                  | 100,00%        | 34.1                      | 32.3                   | 37.4                   |
| FAST-TRACK DIAGNOSTICS                                  | FTD SARS-CoV-2 assay               | 4                 | 0                                                 | 0                  | 4                  | 100,00%        | 32.4                      | 30.1                   | 34.5                   |
| GENESIG                                                 | Coronavirus COVID-19               | 6                 | 3                                                 | 0                  | 3                  | 50,00%         | 34.3                      | 21.2                   | 37.1                   |
| GERBION                                                 | virellaSARS-CoV-2 seqc             | 2                 | 0                                                 | 0                  | 2                  | 100,00%        | 34.6                      | 31.6                   | 37.5                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS                                       | COBAS SARS-CoV-2 Test              | 11                | 1                                                 | 0                  | 10                 | 90,91%         | 31.3                      | 29.2                   | 32.4                   |
| SEEGENE                                                 | Allplex 2019 n-CoV Assay           | 3                 | 0                                                 | 0                  | 3                  | 100,00%        | 33.4                      | 30.0                   | 34.4                   |
|                                                         |                                    | <b>64</b>         | <b>8</b>                                          | <b>0</b>           | <b>56</b>          | <b>87,50%</b>  | <b>31.9</b>               | <b>19.3</b>            | <b>37.5</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340062 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
 Lysat von nicht-infizierten Zellen**

| Reagenz                                | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=969) | fraglich<br>(N=4) | positiv<br>(N=7) | Quote<br>(98.6%) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>E-Gen</b>                           |                                                              |                   |                                                    |                   |                  |                  |
| ALTONA DIAGNOSTIC                      | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0                           | 48                | 48                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ANATOLIA GENEWORKS                     | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ANDERE HERSTELLER                      |                                                              | 10                | 10                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS             | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| CEPHEID                                | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 11                | 11                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)              |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EIGENE HERSTELLUNG                     |                                                              | 47                | 47                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ELITech                                | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 8                 | 8                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EURO IMMUN                             | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EUROFINS TECHNOLOGIES                  | VirSeek SARS-CoV-2 Screen                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| GENETIC SIGNATURES                     | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| GERBION                                | virellaSARS-CoV-2 seqc                                       | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| IMMUNDIAGNOSTIK                        | MutaPLEX Coronavirus                                         | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| LIFERIVER                              | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| LUMINEX                                | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| Priv. Inst. f. Immunol. u. Mol.genetik | AmpliGnost CoV-2 E-Gen                                       | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| QIAGEN                                 | QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel                       | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| R-BIOPHARM                             | RIDA GENE SARS-CoV-2 RUO                                     | 55                | 55                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ROCHE DIAGNOSTICS                      | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 39                | 39                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| SEEGENE                                | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 51                | 50                                                 | 0                 | 1                | 98,04%           |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV E-gene                   | 68                | 67                                                 | 0                 | 1                | 98,53%           |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Sarbeco E-gene                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
|                                        |                                                              | <b>373</b>        | <b>371</b>                                         | <b>0</b>          | <b>2</b>         | <b>99,46%</b>    |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2  
Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340062 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
Lysat von nicht-infizierten Zellen**

| Reagenz                   | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=969) | fraglich<br>(N=4) | positiv<br>(N=7) | Quote<br>(98.6%) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>N-Gen</b>              |                                                              |                   |                                                    |                   |                  |                  |
| ABBOTT                    | RealTime SARS-CoV-2                                          | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 10                | 10                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 3                                                  | 1                 | 0                | 75,00%           |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| CEPHEID                   | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 12                | 12                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| CERTEST BIOTEC            | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| CLONIT                    | quanti COVID-19 Kit                                          | 4                 | 3                                                  | 0                 | 1                | 75,00%           |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR) |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EIGENE HERSTELLUNG        |                                                              | 33                | 33                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ELITech                   | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 9                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EURO IMMUN                | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| GENEMATRIX                | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| GENETIC SIGNATURES        | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| INGENETIX                 | ViroReal SARS-CoV-2 & SARS                                   | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| LIFERIVER                 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| LUMINEX                   | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| NEUMODX                   | NeuMoDx SARS-CoV-2 Assay                                     | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| PATHOFINDER               | RealAccurate Quadruplex Corona-plus PCR Kit                  | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| SEEGENE                   | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 52                | 51                                                 | 0                 | 1                | 98,08%           |
| TIB MOLBIOL               | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV N-gene                   | 13                | 13                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| VITASSAY                  | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
|                           |                                                              | <b>167</b>        | <b>164</b>                                         | <b>1</b>          | <b>2</b>         | <b>98,20%</b>    |
| <b>ORF1a</b>              |                                                              |                   |                                                    |                   |                  |                  |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 10                | 10                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ROCHE DIAGNOSTICS         | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 32                | 32                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
|                           |                                                              | <b>46</b>         | <b>46</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>100,00%</b>   |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340062 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
 Lysat von nicht-infizierten Zellen**

| Reagenz                    | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=969) | fraglich<br>(N=4) | positiv<br>(N=7) | Quote<br>(98.6%) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>ORF1ab</b>              |                                                              |                   |                                                    |                   |                  |                  |
| ANATOLIA GENEWORKS         | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 9                 | 9                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 3                                                  | 1                 | 0                | 75,00%           |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| CERTEST BIOTEC             | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 7                 | 7                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| DIASORIN                   | Simplexa COVID-19 Direct Kit                                 | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 6                 | 6                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| LIFERIVER                  | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| LUMINEX                    | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ROCHE DIAGNOSTICS          | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| VITASSAY                   | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
|                            |                                                              | <b>48</b>         | <b>47</b>                                          | <b>1</b>          | <b>0</b>         | <b>97,92%</b>    |
| <b>RdRP-Gen</b>            |                                                              |                   |                                                    |                   |                  |                  |
| ABACUS DIAGNOSTICA         | GenomEra Coronavirus SARS-CoV-2                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ABBOTT                     | RealTime SARS-CoV-2                                          | 6                 | 6                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 10                | 9                                                  | 0                 | 1                | 90,00%           |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)  |                                                              | 41                | 40                                                 | 1                 | 0                | 97,56%           |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ELITech                    | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 9                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EUROFINS TECHNOLOGIES      | VirSeek SARS-CoV-2 Ident                                     | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| GENEMATRIX                 | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| GENESIG                    | Coronavirus COVID-19                                         | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| GERBION                    | virellaSARS-CoV-2 seqc                                       | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| IMMUNDIAGNOSTIK            | MutaPLEX Coronavirus                                         | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| SEEGENE                    | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 57                | 55                                                 | 0                 | 2                | 96,49%           |
| TIB MOLBIOL                | LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gene                         | 38                | 38                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
|                            |                                                              | <b>182</b>        | <b>178</b>                                         | <b>1</b>          | <b>3</b>         | <b>97,80%</b>    |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340062 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
 Lysat von nicht-infizierten Zellen**

| Reagenz                                                 | Testkit                            | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=969) | fraglich<br>(N=4) | positiv<br>(N=7) | Quote<br>(98.6%) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>S-Gen</b>                                            |                                    |                   |                                                    |                   |                  |                  |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 61                | 60                                                 | 1                 | 0                | 98,36%           |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit        | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| CERTEST BIOTEC                                          | VIASURE SARS-CoV-2 S gene          | 26                | 26                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| DIASORIN                                                | Simplexa COVID-19 Direct Kit       | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| IMMUNDIAGNOSTIK                                         | MutaPLEX Coronavirus               | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
|                                                         |                                    | <b>100</b>        | <b>99</b>                                          | <b>1</b>          | <b>0</b>         | <b>99,00%</b>    |
| <b>Genregion von den Teilnehmern nicht spezifiziert</b> |                                    |                   |                                                    |                   |                  |                  |
| ABBOTT                                                  | RealTime SARS-CoV-2                | 9                 | 9                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 14                | 14                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ANICON                                                  | KyIt SARS-CoV-2 Confirmation RTU   | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ANICON                                                  | KyIt SARS-CoV-2 Screening RTU      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS                              | Vivalytic VRI Multiplex Test       | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| EURO IMMUN                                              | EURORealTime SARS-CoV-2            | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| FAST-TRACK DIAGNOSTICS                                  | FTD SARS-CoV-2 assay               | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| GENESIG                                                 | Coronavirus COVID-19               | 6                 | 6                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| GERBION                                                 | virellaSARS-CoV-2 seqc             | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
| ROCHE DIAGNOSTICS                                       | COBAS SARS-CoV-2 Test              | 11                | 11                                                 | 0                 | 0                | 100,00%          |
| SEEGENE                                                 | Allplex 2019 n-CoV Assay           | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                | 100,00%          |
|                                                         |                                    | <b>64</b>         | <b>64</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>100,00%</b>   |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340063 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 10 000 verdünnt**

| Reagenz                                | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=6) | fraglich<br>(N=2) | positiv<br>(N=971) | Quote<br>(98.8%) | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E-Gen</b>                           |                                                              |                   |                                                  |                   |                    |                  |                           |                        |                        |
| ALTONA DIAGNOSTIC                      | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0                           | 48                | 0                                                | 0                 | 48                 | 100,00%          | 25.0                      | 22.0                   | 30.3                   |
| ANATOLIA GENEWORKS                     | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 4                 | 1                                                | 0                 | 3                  | 75,00%           | 26.8                      | 23.3                   | 29.1                   |
| ANDERE HERSTELLER                      |                                                              | 10                | 0                                                | 0                 | 10                 | 100,00%          | 26.7                      | 25.4                   | 29.1                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS             | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| CEPHEID                                | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 11                | 0                                                | 0                 | 11                 | 100,00%          | 24.8                      | 24.1                   | 27.3                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)              |                                                              | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG                     |                                                              | 47                | 0                                                | 0                 | 47                 | 100,00%          | 26.0                      | 19.8                   | 33.0                   |
| ELITech                                | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 8                 | 0                                                | 0                 | 8                  | 100,00%          | 25.5                      | 23.8                   | 31.0                   |
| EURO IMMUN                             | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 27.3                      | 27.3                   | 27.3                   |
| EUROFINS TECHNOLOGIES                  | VirSeek SARS-CoV-2 Screen                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 29.9                      | 29.9                   | 29.9                   |
| GENETIC SIGNATURES                     | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 25.0                      | 25.0                   | 25.0                   |
| GERBION                                | viarellaSARS-CoV-2 seqc                                      | 5                 | 0                                                | 0                 | 5                  | 100,00%          | 26.6                      | 26.0                   | 28.0                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK                        | MutaPLEX Coronavirus                                         | 5                 | 0                                                | 0                 | 5                  | 100,00%          | 27.4                      | 24.9                   | 29.2                   |
| LIFERIVER                              | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 1                                                | 0                 | 2                  | 66,67%           | 22.8                      | 21.0                   | 24.6                   |
| LUMINEX                                | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 26.0                      | 26.0                   | 26.0                   |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  | 100,00%          | 24.2                      | 23.9                   | 28.1                   |
| Priv. Inst. f. Immunol. u. Mol.genetik | AmpliGnost CoV-2 E-Gen                                       | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 23.8                      | 22.4                   | 25.6                   |
| QIAGEN                                 | QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel                       | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  | 100,00%          | 26.7                      | 22.2                   | 30.4                   |
| R-BIOPHARM                             | RIDA GENE SARS-CoV-2 RUO                                     | 55                | 0                                                | 0                 | 55                 | 100,00%          | 26.5                      | 20.6                   | 30.1                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS                      | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 38                | 0                                                | 0                 | 38                 | 100,00%          | 26.0                      | 23.8                   | 28.7                   |
| SEEGENE                                | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 51                | 0                                                | 0                 | 51                 | 100,00%          | 24.7                      | 22.0                   | 29.0                   |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV E-gene                   | 67                | 0                                                | 1                 | 66                 | 98,51%           | 26.0                      | 22.8                   | 35.3                   |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Sarbeco E-gene                                      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 25.9                      | 25.9                   | 25.9                   |
|                                        |                                                              | <b>371</b>        | <b>2</b>                                         | <b>1</b>          | <b>368</b>         | <b>99,19%</b>    | <b>25.7</b>               | <b>19.8</b>            | <b>35.3</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340063 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 10 000 verdünnt**

| Reagenz                   | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=6) | fraglich<br>(N=2) | positiv<br>(N=971) | Quote<br>(98.8%) | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>N-Gen</b>              |                                                              |                   |                                                  |                   |                    |                  |                           |                        |                        |
| ABBOTT                    | RealTime SARS-CoV-2                                          | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 10                | 0                                                | 0                 | 10                 | 100,00%          | 28.4                      | 23.3                   | 39.6                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 21.4                      | 20.0                   | 24.4                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  | 100,00%          | 22.7                      | 20.4                   | 24.9                   |
| CEPHEID                   | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 12                | 0                                                | 0                 | 12                 | 100,00%          | 26.6                      | 26.3                   | 29.8                   |
| CERTEST BIOTEC            | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 26.4                      | 24.4                   | 29.6                   |
| CLONIT                    | quanti COVID-19 Kit                                          | 4                 | 1                                                | 0                 | 3                  | 75,00%           | 25.4                      | 23.1                   | 27.6                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR) |                                                              | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG        |                                                              | 33                | 0                                                | 0                 | 33                 | 100,00%          | 27.8                      | 23.2                   | 38.3                   |
| ELITech                   | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 0                                                | 0                 | 9                  | 100,00%          | 25.2                      | 23.4                   | 31.0                   |
| EURO IMMUN                | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 24.7                      | 24.7                   | 24.7                   |
| GENEMATRIX                | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 27.3                      | 26.0                   | 29.7                   |
| GENETIC SIGNATURES        | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 26.1                      | 26.1                   | 26.1                   |
| INGENETIX                 | ViroReal SARS-CoV-2 & SARS                                   | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  | 100,00%          | 28.1                      | 26.9                   | 29.0                   |
| LIFERIVER                 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 1                                                | 0                 | 2                  | 66,67%           | 24.1                      | 22.0                   | 26.2                   |
| LUMINEX                   | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| NEUMODX                   | NeuMoDx SARS-CoV-2 Assay                                     | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  | 100,00%          | 23.5                      | 23.1                   | 23.8                   |
| PATHOFINDER               | RealAccurate Quadruplex Corona-plus PCR Kit                  | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  | 100,00%          | 27.6                      | 23.5                   | 27.7                   |
| SEEGENE                   | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 52                | 0                                                | 0                 | 52                 | 100,00%          | 26.8                      | 20.2                   | 29.2                   |
| TIB MOLBIOL               | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV N-gene                   | 13                | 0                                                | 0                 | 13                 | 100,00%          | 32.7                      | 30.8                   | 37.2                   |
| VITASSAY                  | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 27.4                      | 27.4                   | 27.4                   |
|                           |                                                              | <b>167</b>        | <b>2</b>                                         | <b>0</b>          | <b>165</b>         | <b>98,80%</b>    | <b>26.9</b>               | <b>20.0</b>            | <b>39.6</b>            |
| <b>ORF1a</b>              |                                                              |                   |                                                  |                   |                    |                  |                           |                        |                        |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 27.1                      | 27.1                   | 27.1                   |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 3                 | 0                                                | 1                 | 2                  | 66,67%           | 27.1                      | 25.0                   | 27.4                   |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 10                | 0                                                | 0                 | 10                 | 100,00%          | 25.2                      | 24.0                   | 27.5                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS         | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 32                | 0                                                | 0                 | 32                 | 100,00%          | 25.5                      | 24.8                   | 31.5                   |
|                           |                                                              | <b>46</b>         | <b>0</b>                                         | <b>1</b>          | <b>45</b>          | <b>97,83%</b>    | <b>25.5</b>               | <b>24.0</b>            | <b>31.5</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340063 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 10 000 verdünnt**

| Reagenz                    | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=6) | fraglich<br>(N=2) | positiv<br>(N=971) | Quote<br>(98.8%) | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ORF1ab</b>              |                                                              |                   |                                                  |                   |                    |                  |                           |                        |                        |
| ANATOLIA GENEWORKS         | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 5                 | 1                                                | 0                 | 4                  | 80,00%           | 25.0                      | 24.5                   | 29.5                   |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 9                 | 0                                                | 0                 | 9                  | 100,00%          | 25.6                      | 14.5                   | 33.4                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 22.6                      | 20.0                   | 24.4                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  | 100,00%          | 20.3                      | 16.4                   | 24.1                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| CERTEST BIOTEC             | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 7                 | 0                                                | 0                 | 7                  | 100,00%          | 24.3                      | 22.3                   | 30.7                   |
| DIASORIN                   | Simplexa COVID-19 Direct Kit                                 | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 22.4                      | 22.2                   | 22.9                   |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 6                 | 0                                                | 0                 | 6                  | 100,00%          | 28.7                      | 25.0                   | 30.3                   |
| LIFERIVER                  | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 1                                                | 0                 | 2                  | 66,67%           | 24.3                      | 22.0                   | 26.6                   |
| LUMINEX                    | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| ROCHE DIAGNOSTICS          | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        |                   |                                                  |                   |                    |                  |                           |                        |                        |
| VITASSAY                   | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  | 100,00%          | 26.2                      | 26.0                   | 26.4                   |
|                            |                                                              | <b>47</b>         | <b>2</b>                                         | <b>0</b>          | <b>45</b>          | <b>95,74%</b>    | <b>24.7</b>               | <b>14.5</b>            | <b>33.4</b>            |
| <b>RdRP-Gen</b>            |                                                              |                   |                                                  |                   |                    |                  |                           |                        |                        |
| ABACUS DIAGNOSTICA         | GenomEra Coronavirus SARS-CoV-2                              | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| ABBOTT                     | RealTime SARS-CoV-2                                          | 6                 | 0                                                | 0                 | 6                  | 100,00%          | 14.1                      | 13.4                   | 17.5                   |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 10                | 0                                                | 0                 | 10                 | 100,00%          | 25.9                      | 25.2                   | 35.1                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)  |                                                              | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 42                | 0                                                | 0                 | 42                 | 100,00%          | 28.1                      | 23.0                   | 36.1                   |
| ELITech                    | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 0                                                | 0                 | 9                  | 100,00%          | 27.2                      | 24.8                   | 32.8                   |
| EUROFINS TECHNOLOGIES      | VirSeek SARS-CoV-2 Ident                                     | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| GENEMATRIX                 | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 28.7                      | 27.0                   | 32.9                   |
| GENESIG                    | Coronavirus COVID-19                                         | 5                 | 0                                                | 0                 | 5                  | 100,00%          | 28.8                      | 27.0                   | 32.5                   |
| GERBION                    | virellaSARS-CoV-2 seqc                                       | 5                 | 0                                                | 0                 | 5                  | 100,00%          | 29.5                      | 29.0                   | 31.6                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK            | MutaPLEX Coronavirus                                         | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 28.1                      | 25.0                   | 31.0                   |
| SEEGENE                    | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 57                | 0                                                | 0                 | 57                 | 100,00%          | 26.2                      | 24.0                   | 33.2                   |
| TIB MOLBIOL                | LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gene                         | 39                | 0                                                | 0                 | 39                 | 100,00%          | 30.5                      | 24.7                   | 38.3                   |
|                            |                                                              | <b>184</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>          | <b>184</b>         | <b>100,00%</b>   | <b>27.2</b>               | <b>13.4</b>            | <b>38.3</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340063 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 10 000 verdünnt**

| Reagenz                                                 | Testkit                            | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=6) | fraglich<br>(N=2) | positiv<br>(N=971) | Quote<br>(98.8%) | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>S-Gen</b>                                            |                                    |                   |                                                  |                   |                    |                  |                           |                        |                        |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 61                | 0                                                | 0                 | 61                 | 100,00%          | 24.7                      | 21.0                   | 28.1                   |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 21.9                      | 20.0                   | 24.6                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit        | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  | 100,00%          | 20.6                      | 18.0                   | 23.1                   |
| CERTEST BIOTEC                                          | VIASURE SARS-CoV-2 S gene          | 26                | 0                                                | 0                 | 26                 | 100,00%          | 27.7                      | 25.9                   | 30.0                   |
| DIASORIN                                                | Simplexa COVID-19 Direct Kit       | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 22.8                      | 22.2                   | 22.9                   |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 25.6                      | 25.6                   | 25.6                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK                                         | MutaPLEX Coronavirus               | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 29.9                      | 29.9                   | 29.9                   |
|                                                         |                                    | <b>100</b>        | <b>0</b>                                         | <b>0</b>          | <b>100</b>         | <b>100,00%</b>   | <b>25.0</b>               | <b>18.0</b>            | <b>30.0</b>            |
| <b>Genregion von den Teilnehmern nicht spezifiziert</b> |                                    |                   |                                                  |                   |                    |                  |                           |                        |                        |
| ABBOTT                                                  | RealTime SARS-CoV-2                | 9                 | 0                                                | 0                 | 9                  | 100,00%          | 15.4                      | 13.5                   | 16.7                   |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 28.0                      | 28.0                   | 28.0                   |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 14                | 0                                                | 0                 | 14                 | 100,00%          | 25.8                      | 12.8                   | 29.0                   |
| ANICON                                                  | Kytl SARS-CoV-2 Confirmation RTU   | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  | 100,00%          | 27.0                      | 25.2                   | 30.5                   |
| ANICON                                                  | Kytl SARS-CoV-2 Screening RTU      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 27.9                      | 27.9                   | 27.9                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 1                 | 0                                                | 0                 | 1                  | 100,00%          | 25.0                      | 25.0                   | 25.0                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS                              | Vivalytic VRI Multiplex Test       | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  | 100,00%          |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  | 100,00%          | 25.7                      | 24.6                   | 28.3                   |
| EURO IMMUN                                              | EURORealTime SARS-CoV-2            | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 27.1                      | 25.6                   | 31.1                   |
| FAST-TRACK DIAGNOSTICS                                  | FTD SARS-CoV-2 assay               | 4                 | 0                                                | 0                 | 4                  | 100,00%          | 25.6                      | 23.7                   | 27.7                   |
| GENESIG                                                 | Coronavirus COVID-19               | 6                 | 0                                                | 0                 | 6                  | 100,00%          | 31.4                      | 26.7                   | 35.9                   |
| GERBION                                                 | virellaSARS-CoV-2 seqc             | 2                 | 0                                                | 0                 | 2                  | 100,00%          | 26.5                      | 25.7                   | 27.3                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS                                       | COBAS SARS-CoV-2 Test              | 11                | 0                                                | 0                 | 11                 | 100,00%          | 25.3                      | 24.6                   | 30.8                   |
| SEEGENE                                                 | Allplex 2019 n-CoV Assay           | 3                 | 0                                                | 0                 | 3                  | 100,00%          | 25.4                      | 25.0                   | 27.6                   |
|                                                         |                                    | <b>64</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>          | <b>64</b>          | <b>100,00%</b>   | <b>25.7</b>               | <b>12.8</b>            | <b>35.9</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340064 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 100 000 verdünnt**

| Reagenz                                | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=64) | fraglich<br>(N=2) | positiv<br>(N=916) | Probe<br>nicht<br>bewertet | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>E-Gen</b>                           |                                                              |                   |                                                   |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ALTONA DIAGNOSTIC                      | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0                           | 48                | 0                                                 | 0                 | 48                 |                            | 28.7                      | 25.4                   | 33.9                   |
| ANATOLIA GENEWORKS                     | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 4                 | 2                                                 | 0                 | 2                  |                            | 25.2                      | 20.5                   | 29.8                   |
| ANDERE HERSTELLER                      |                                                              | 10                | 0                                                 | 0                 | 10                 |                            | 30.0                      | 28.7                   | 33.3                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS             | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 2                 | 0                                                 | 0                 | 2                  |                            |                           |                        |                        |
| CEPHEID                                | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 11                | 1                                                 | 0                 | 10                 |                            | 28.2                      | 27.6                   | 30.5                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)              |                                                              | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG                     |                                                              | 47                | 2                                                 | 0                 | 45                 |                            | 29.4                      | 22.9                   | 34.0                   |
| ELITech                                | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 8                 | 1                                                 | 0                 | 7                  |                            | 28.7                      | 26.9                   | 34.1                   |
| EURO IMMUN                             | EUORealTime SARS-CoV-2                                       | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 30.2                      | 30.2                   | 30.2                   |
| EUROFINS TECHNOLOGIES                  | VirSeek SARS-CoV-2 Screen                                    | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 33.1                      | 33.1                   | 33.1                   |
| GENETIC SIGNATURES                     | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 29.5                      | 29.5                   | 29.5                   |
| GERBION                                | viarellaSARS-CoV-2 seqc                                      | 5                 | 0                                                 | 0                 | 5                  |                            | 30.0                      | 29.5                   | 30.0                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK                        | MutaPLEX Coronavirus                                         | 5                 | 0                                                 | 0                 | 5                  |                            | 30.7                      | 28.9                   | 32.0                   |
| LIFERIVER                              | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 2                                                 | 0                 | 1                  |                            | 27.6                      | 27.6                   | 27.6                   |
| LUMINEX                                | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 29.0                      | 29.0                   | 29.0                   |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 3                 | 0                                                 | 0                 | 3                  |                            | 28.4                      | 27.9                   | 31.6                   |
| Priv. Inst. f. Immunol. u. Mol.genetik | AmpliGnost CoV-2 E-Gen                                       | 4                 | 0                                                 | 0                 | 4                  |                            | 27.1                      | 25.5                   | 29.5                   |
| QIAGEN                                 | QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel                       | 3                 | 0                                                 | 0                 | 3                  |                            | 30.2                      | 25.3                   | 33.5                   |
| R-BIOPHARM                             | RIDA GENE SARS-CoV-2 RUO                                     | 55                | 0                                                 | 0                 | 55                 |                            | 30.0                      | 17.7                   | 33.8                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS                      | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 39                | 0                                                 | 0                 | 39                 |                            | 29.1                      | 27.8                   | 32.0                   |
| SEEGENE                                | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 51                | 7                                                 | 0                 | 44                 |                            | 28.1                      | 25.4                   | 33.7                   |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV E-gene                   | 68                | 2                                                 | 0                 | 66                 |                            | 29.7                      | 26.9                   | 36.0                   |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Sarbeco E-gene                                      | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 29.5                      | 29.5                   | 29.5                   |
|                                        |                                                              | <b>373</b>        | <b>17</b>                                         | <b>0</b>          | <b>356</b>         |                            | <b>29.2</b>               | <b>17.7</b>            | <b>36.0</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340064 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 100 000 verdünnt**

| Reagenz                   | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=64) | fraglich<br>(N=2) | positiv<br>(N=916) | Probe<br>nicht<br>bewertet | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>N-Gen</b>              |                                                              |                   |                                                   |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ABBOTT                    | RealTime SARS-CoV-2                                          | 3                 | 0                                                 | 0                 | 3                  |                            |                           |                        |                        |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 10                | 0                                                 | 0                 | 10                 |                            | 31.7                      | 26.2                   | 41.0                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 0                                                 | 0                 | 4                  |                            | 26.3                      | 20.0                   | 27.6                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 1                                                 | 0                 | 1                  |                            | 21.9                      | 21.9                   | 21.9                   |
| CEPHEID                   | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 12                | 1                                                 | 0                 | 11                 |                            | 30.3                      | 29.8                   | 32.9                   |
| CERTEST BIOTEC            | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 4                 | 0                                                 | 0                 | 4                  |                            | 29.8                      | 27.3                   | 31.8                   |
| CLONIT                    | quanti COVID-19 Kit                                          | 4                 | 3                                                 | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR) |                                                              | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG        |                                                              | 33                | 1                                                 | 0                 | 32                 |                            | 31.3                      | 27.2                   | 38.5                   |
| ELITech                   | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 1                                                 | 0                 | 8                  |                            | 28.5                      | 26.2                   | 33.7                   |
| EURO IMMUN                | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 27.8                      | 27.8                   | 27.8                   |
| GENEMATRIX                | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 4                                                 | 0                 | 0                  |                            |                           |                        |                        |
| GENETIC SIGNATURES        | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 29.8                      | 29.8                   | 29.8                   |
| INGENETIX                 | ViroReal SARS-CoV-2 & SARS                                   | 3                 | 0                                                 | 0                 | 3                  |                            | 30.6                      | 30.0                   | 31.3                   |
| LIFERIVER                 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 2                                                 | 0                 | 1                  |                            | 29.2                      | 29.2                   | 29.2                   |
| LUMINEX                   | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| NEUMODX                   | NeuMoDx SARS-CoV-2 Assay                                     | 3                 | 0                                                 | 0                 | 3                  |                            | 26.6                      | 26.5                   | 26.7                   |
| PATHOFINDER               | RealAccurate Quadruplex Corona-plus PCR Kit                  | 3                 | 0                                                 | 0                 | 3                  |                            | 30.6                      | 27.5                   | 31.4                   |
| SEEGENE                   | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 52                | 7                                                 | 0                 | 45                 |                            | 30.0                      | 25.0                   | 41.5                   |
| TIB MOLBIOL               | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV N-gene                   | 12                | 0                                                 | 0                 | 12                 |                            | 35.3                      | 33.3                   | 37.5                   |
| VITASSAY                  | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 30.2                      | 30.2                   | 30.2                   |
|                           |                                                              | <b>166</b>        | <b>20</b>                                         | <b>0</b>          | <b>146</b>         |                            | <b>30.2</b>               | <b>20.0</b>            | <b>41.5</b>            |
| <b>ORF1a</b>              |                                                              |                   |                                                   |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 30.5                      | 30.5                   | 30.5                   |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 3                 | 0                                                 | 1                 | 2                  |                            | 31.1                      | 27.7                   | 31.2                   |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 10                | 0                                                 | 0                 | 10                 |                            | 28.9                      | 27.3                   | 34.0                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS         | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 32                | 1                                                 | 0                 | 31                 |                            | 28.7                      | 28.0                   | 33.2                   |
|                           |                                                              | <b>46</b>         | <b>1</b>                                          | <b>1</b>          | <b>44</b>          |                            | <b>28.8</b>               | <b>27.3</b>            | <b>34.0</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340064 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 100 000 verdünnt**

| Reagenz                    | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=64) | fraglich<br>(N=2) | positiv<br>(N=916) | Probe<br>nicht<br>bewertet | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ORF1ab</b>              |                                                              |                   |                                                   |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ANATOLIA GENEWORKS         | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 5                 | 2                                                 | 0                 | 3                  |                            | 28.8                      | 27.8                   | 32.4                   |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 9                 | 0                                                 | 0                 | 9                  |                            | 29.4                      | 18.4                   | 35.6                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 0                                                 | 0                 | 4                  |                            | 26.2                      | 20.0                   | 29.6                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 1                                                 | 0                 | 1                  |                            | 22.5                      | 22.5                   | 22.5                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 4                 | 0                                                 | 0                 | 4                  |                            |                           |                        |                        |
| CERTEST BIOTEC             | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 7                 | 0                                                 | 0                 | 7                  |                            | 27.9                      | 25.8                   | 34.5                   |
| DIASORIN                   | Simplexa COVID-19 Direct Kit                                 | 4                 | 2                                                 | 0                 | 2                  |                            | 26.7                      | 26.3                   | 27.1                   |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 6                 | 0                                                 | 0                 | 6                  |                            | 32.4                      | 28.4                   | 33.9                   |
| LIFERIVER                  | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 2                                                 | 0                 | 1                  |                            | 33.1                      | 29.2                   | 37.0                   |
| LUMINEX                    | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| ROCHE DIAGNOSTICS          | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 28.4                      | 28.4                   | 28.4                   |
| VITASSAY                   | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 2                 | 0                                                 | 0                 | 2                  |                            | 29.4                      | 28.7                   | 30.1                   |
|                            |                                                              | <b>48</b>         | <b>7</b>                                          | <b>0</b>          | <b>41</b>          |                            | <b>28.8</b>               | <b>18.4</b>            | <b>37.0</b>            |
| <b>RdRP-Gen</b>            |                                                              |                   |                                                   |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ABACUS DIAGNOSTICA         | GenomEra Coronavirus SARS-CoV-2                              | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| ABBOTT                     | RealTime SARS-CoV-2                                          | 6                 | 0                                                 | 0                 | 6                  |                            | 17.6                      | 16.0                   | 21.1                   |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 10                | 0                                                 | 0                 | 10                 |                            | 29.0                      | 27.0                   | 38.5                   |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)  |                                                              | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 42                | 3                                                 | 0                 | 39                 |                            | 31.3                      | 26.7                   | 39.8                   |
| ELITech                    | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 1                                                 | 0                 | 8                  |                            | 30.0                      | 28.1                   | 36.5                   |
| EUROFINS TECHNOLOGIES      | VirSeek SARS-CoV-2 Ident                                     | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| GENEMATRIX                 | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 4                                                 | 0                 | 0                  |                            |                           |                        |                        |
| GENESIG                    | Coronavirus COVID-19                                         | 5                 | 0                                                 | 0                 | 5                  |                            | 32.3                      | 30.0                   | 36.6                   |
| GERBION                    | virellaSARS-CoV-2 seqc                                       | 5                 | 0                                                 | 0                 | 5                  |                            | 32.8                      | 31.9                   | 34.9                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK            | MutaPLEX Coronavirus                                         | 4                 | 1                                                 | 0                 | 3                  |                            | 28.6                      | 28.5                   | 34.2                   |
| SEEGENE                    | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 57                | 7                                                 | 0                 | 50                 |                            | 29.7                      | 27.6                   | 32.8                   |
| TIB MOLBIOL                | LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gene                         | 40                | 0                                                 | 1                 | 39                 |                            | 33.9                      | 28.0                   | 41.4                   |
|                            |                                                              | <b>185</b>        | <b>16</b>                                         | <b>1</b>          | <b>168</b>         |                            | <b>30.5</b>               | <b>16.0</b>            | <b>41.4</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340064 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 positiv (inaktiviert), 1 : 100 000 verdünnt**

| Reagenz                                                 | Testkit                            | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=64) | fraglich<br>(N=2) | positiv<br>(N=916) | Probe<br>nicht<br>bewertet | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Median | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Min | Ct/Cp/<br>Cq/CN<br>Max |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>S-Gen</b>                                            |                                    |                   |                                                   |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 61                | 0                                                 | 0                 | 61                 |                            | 28.0                      | 24.5                   | 31.5                   |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            |                           |                        |                        |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 4                 | 0                                                 | 0                 | 4                  |                            | 26.9                      | 20.0                   | 28.0                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit        | 2                 | 1                                                 | 0                 | 1                  |                            | 21.5                      | 21.5                   | 21.5                   |
| CERTEST BIOTEC                                          | VIASURE SARS-CoV-2 S gene          | 26                | 0                                                 | 0                 | 26                 |                            | 31.1                      | 29.3                   | 32.7                   |
| DIASORIN                                                | Simplexa COVID-19 Direct Kit       | 4                 | 2                                                 | 0                 | 2                  |                            | 26.6                      | 26.5                   | 26.6                   |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 29.6                      | 29.6                   | 29.6                   |
| IMMUNDIAGNOSTIK                                         | MutaPLEX Coronavirus               | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 34.2                      | 34.2                   | 34.2                   |
|                                                         |                                    | <b>100</b>        | <b>3</b>                                          | <b>0</b>          | <b>97</b>          |                            | <b>28.6</b>               | <b>20.0</b>            | <b>34.2</b>            |
| <b>Genregion von den Teilnehmern nicht spezifiziert</b> |                                    |                   |                                                   |                   |                    |                            |                           |                        |                        |
| ABBOTT                                                  | RealTime SARS-CoV-2                | 9                 | 0                                                 | 0                 | 9                  |                            | 18.5                      | 16.8                   | 20.3                   |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 31.0                      | 31.0                   | 31.0                   |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 14                | 0                                                 | 0                 | 14                 |                            | 29.4                      | 16.5                   | 36.5                   |
| ANICON                                                  | Kyrt SARS-CoV-2 Confirmation RTU   | 3                 | 0                                                 | 0                 | 3                  |                            | 30.5                      | 28.5                   | 34.7                   |
| ANICON                                                  | Kyrt SARS-CoV-2 Screening RTU      | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 32.1                      | 32.1                   | 32.1                   |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 1                 | 0                                                 | 0                 | 1                  |                            | 28.5                      | 28.5                   | 28.5                   |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS                              | Vivalytic VRI Multiplex Test       | 2                 | 0                                                 | 0                 | 2                  |                            |                           |                        |                        |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 3                 | 0                                                 | 0                 | 3                  |                            | 30.9                      | 27.7                   | 31.8                   |
| EURO IMMUN                                              | EURORealTime SARS-CoV-2            | 4                 | 0                                                 | 0                 | 4                  |                            | 30.8                      | 28.9                   | 34.1                   |
| FAST-TRACK DIAGNOSTICS                                  | FTD SARS-CoV-2 assay               | 4                 | 0                                                 | 0                 | 4                  |                            | 28.9                      | 27.4                   | 30.5                   |
| GENESIG                                                 | Coronavirus COVID-19               | 6                 | 0                                                 | 0                 | 6                  |                            | 34.6                      | 30.8                   | 40.0                   |
| GERBION                                                 | virellaSARS-CoV-2 seqc             | 2                 | 0                                                 | 0                 | 2                  |                            | 29.7                      | 28.6                   | 30.8                   |
| ROCHE DIAGNOSTICS                                       | COBAS SARS-CoV-2 Test              | 11                | 0                                                 | 0                 | 11                 |                            | 28.8                      | 28.0                   | 33.9                   |
| SEEGENE                                                 | Allplex 2019 n-CoV Assay           | 3                 | 0                                                 | 0                 | 3                  |                            | 28.2                      | 28.0                   | 31.1                   |
|                                                         |                                    | <b>64</b>         | <b>0</b>                                          | <b>0</b>          | <b>64</b>          |                            | <b>29.0</b>               | <b>16.5</b>            | <b>40.0</b>            |

Bitte beachten Sie: Die Anzahl an Analysen, die für die Spalten "Ct/Cp/Cq/CN Median", "Ct/Cp/Cq/CN Min" und "Ct/Cp/Cq/CN Max" berücksichtigt wurden, kann geringer sein als die gezeigte Gesamtzahl an Analysen (Spalte Gesamt), wenn einzelne Labore keine Ct/Cp/Cq/CN-Werte übermittelt haben.

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2  
Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340065 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
positiv für HCoV 229E 1 : 2 500 verdünnt, Spezifitätskontrolle**

| Reagenz                                | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=908) | fraglich<br>(N=4) | positiv<br>(N=67) | Quote<br>(92.4%) |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>E-Gen</b>                           |                                                              |                   |                                                    |                   |                   |                  |
| ALTONA DIAGNOSTIC                      | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0                           | 48                | 48                                                 | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ANATOLIA GENEWORKS                     | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 4                 | 2                                                  | 0                 | 2                 | 50,00%           |
| ANDERE HERSTELLER                      |                                                              | 10                | 10                                                 | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS             | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| CEPHEID                                | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 11                | 10                                                 | 0                 | 1                 | 90,91%           |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)              |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 95,74%           |
| EIGENE HERSTELLUNG                     |                                                              | 47                | 45                                                 | 0                 | 2                 | 100,00%          |
| ELITech                                | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 8                 | 7                                                  | 0                 | 1                 | 87,50%           |
| EURO IMMUN                             | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| EUROFINS TECHNOLOGIES                  | VirSeek SARS-CoV-2 Screen                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| GENETIC SIGNATURES                     | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| GERBION                                | virellaSARS-CoV-2 seqc                                       | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| IMMUNDIAGNOSTIK                        | MutaPLEX Coronavirus                                         | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| LIFERIVER                              | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 2                                                  | 0                 | 1                 | 66,67%           |
| LUMINEX                                | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| MIKROGEN                               | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| Priv. Inst. f. Immunol. u. Mol.genetik | AmpliGnost CoV-2 E-Gen                                       | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| QIAGEN                                 | QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel                       | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| R-BIOPHARM                             | RIDA GENE SARS-CoV-2 RUO                                     | 55                | 54                                                 | 0                 | 1                 | 98,18%           |
| ROCHE DIAGNOSTICS                      | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 39                | 39                                                 | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| SEEGENE                                | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 51                | 44                                                 | 0                 | 7                 | 86,27%           |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV E-gene                   | 68                | 65                                                 | 0                 | 3                 | 95,59%           |
| TIB MOLBIOL                            | LightMix Sarbeco E-gene                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
|                                        |                                                              | <b>373</b>        | <b>355</b>                                         | <b>0</b>          | <b>18</b>         | <b>95,17%</b>    |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2  
Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340065 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
positiv für HCoV 229E 1 : 2 500 verdünnt, Spezifitätskontrolle**

| Reagenz                   | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=908) | fraglich<br>(N=4) | positiv<br>(N=67) | Quote<br>(92.4%) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>N-Gen</b>              |                                                              |                   |                                                    |                   |                   |                  |
| ABBOTT                    | RealTime SARS-CoV-2                                          | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 10                | 10                                                 | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 3                                                  | 1                 | 0                 | 75,00%           |
| APPLIED BIOSYSTEMS        | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 1                                                  | 0                 | 1                 | 50,00%           |
| CEPHEID                   | Xpert Xpress SARS-CoV-2                                      | 12                | 11                                                 | 0                 | 1                 | 91,67%           |
| CERTEST BIOTEC            | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| CLONIT                    | quanti COVID-19 Kit                                          | 4                 | 1                                                  | 0                 | 3                 | 25,00%           |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR) |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| EIGENE HERSTELLUNG        |                                                              | 33                | 32                                                 | 0                 | 1                 | 96,97%           |
| ELITech                   | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 8                                                  | 0                 | 1                 | 88,89%           |
| EURO IMMUN                | EURORealTime SARS-CoV-2                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| GENEMATRIX                | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 0                                                  | 0                 | 4                 | 0,00%            |
| GENETIC SIGNATURES        | EasyScreen SARS-CoV-2 Detection Kit                          | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| INGENETIX                 | ViroReal SARS-CoV-2 & SARS                                   | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| LIFERIVER                 | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 2                                                  | 0                 | 1                 | 66,67%           |
| LUMINEX                   | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| NEUMODX                   | NeuMoDx SARS-CoV-2 Assay                                     | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| PATHOFINDER               | RealAccurate Quadruplex Corona-plus PCR Kit                  | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| SEEGENE                   | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 52                | 45                                                 | 0                 | 7                 | 86,54%           |
| TIB MOLBIOL               | LightMix Modular SARS and Wuhan CoV N-gene                   | 12                | 12                                                 | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| VITASSAY                  | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
|                           |                                                              | <b>166</b>        | <b>146</b>                                         | <b>1</b>          | <b>19</b>         | <b>87,95%</b>    |
| <b>ORF1a</b>              |                                                              |                   |                                                    |                   |                   |                  |
| ANDERE HERSTELLER         |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus Panel                                  | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| MIKROGEN                  | ampliCube Coronavirus SARS-CoV-2 RUO                         | 10                | 10                                                 | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ROCHE DIAGNOSTICS         | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 32                | 30                                                 | 0                 | 2                 | 93,75%           |
|                           |                                                              | <b>46</b>         | <b>44</b>                                          | <b>0</b>          | <b>2</b>          | <b>95,65%</b>    |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340065 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
 positiv für HCoV 229E 1 : 2 500 verdünnt, Spezifitätskontrolle**

| Reagenz                    | Testkit                                                      | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=908) | fraglich<br>(N=4) | positiv<br>(N=67) | Quote<br>(92.4%) |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>ORF1ab</b>              |                                                              |                   |                                                    |                   |                   |                  |
| ANATOLIA GENEWORKS         | Bosphore Novel Coronavirus Detection Kit v2                  | 5                 | 3                                                  | 0                 | 2                 | 60,00%           |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 9                 | 9                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1                                | 4                 | 3                                                  | 1                 | 0                 | 75,00%           |
| APPLIED BIOSYSTEMS         | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit                                  | 2                 | 1                                                  | 0                 | 1                 | 50,00%           |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS | Vivalytic VRI Multiplex Test                                 | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| CERTEST BIOTEC             | VIASURE SARS-CoV-2                                           | 7                 | 7                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| DIASORIN                   | Simplexa COVID-19 Direct Kit                                 | 4                 | 2                                                  | 0                 | 2                 | 50,00%           |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 6                 | 6                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| LIFERIVER                  | Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real Time Multiplex RT-PCR Kit | 3                 | 2                                                  | 0                 | 1                 | 66,67%           |
| LUMINEX                    | NxTAG CoV                                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ROCHE DIAGNOSTICS          | COBAS SARS-CoV-2 Test                                        | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| VITASSAY                   | Vitassay qPCR SARSCoV-2                                      | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
|                            |                                                              | <b>48</b>         | <b>41</b>                                          | <b>1</b>          | <b>6</b>          | <b>85,42%</b>    |
| <b>RdRP-Gen</b>            |                                                              |                   |                                                    |                   |                   |                  |
| ABACUS DIAGNOSTICA         | GenomEra Coronavirus SARS-CoV-2                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ABBOTT                     | RealTime SARS-CoV-2                                          | 6                 | 6                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ANDERE HERSTELLER          |                                                              | 10                | 10                                                 | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| EIGENE HERSTELLUNG (dPCR)  |                                                              | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| EIGENE HERSTELLUNG         |                                                              | 41                | 37                                                 | 1                 | 3                 | 90,24%           |
| ELITech                    | GeneFinder COVID-19 Plus                                     | 9                 | 8                                                  | 0                 | 1                 | 88,89%           |
| EUROFINS TECHNOLOGIES      | VirSeek SARS-CoV-2 Ident                                     | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| GENEMATRIX                 | NeoPlex COVID-19 Detection Kit                               | 4                 | 0                                                  | 0                 | 4                 | 0,00%            |
| GENESIG                    | Coronavirus COVID-19                                         | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| GERBION                    | virellaSARS-CoV-2 seqc                                       | 5                 | 5                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| IMMUNDIAGNOSTIK            | MutaPLEX Coronavirus                                         | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| SEEGENE                    | Allplex 2019 n-CoV Assay                                     | 57                | 50                                                 | 0                 | 7                 | 87,72%           |
| TIB MOLBIOL                | LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gene                         | 38                | 37                                                 | 0                 | 1                 | 97,37%           |
|                            |                                                              | <b>182</b>        | <b>165</b>                                         | <b>1</b>          | <b>16</b>         | <b>90,66%</b>    |

**Extra INSTAND Ringversuch 340 Virusgenom-Nachweis SARS-CoV-2**  
**Termin April 2020 - Qualitative Tabellen**

**340**

**70: PCR-34070 - SARS-CoV-2 (RNA) – qualitativ**

**Probe 340065 (Ergebnis (qual)) - SARS-CoV-2 negativ,  
 positiv für HCoV 229E 1 : 2 500 verdünnt, Spezifitätskontrolle**

| Reagenz                                                 | Testkit                            | Gesamt<br>(N=983) | unterhalb<br>Nachweisgrenze/<br>negativ<br>(N=908) | fraglich<br>(N=4) | positiv<br>(N=67) | Quote<br>(92.4%) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>S-Gen</b>                                            |                                    |                   |                                                    |                   |                   |                  |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 61                | 58                                                 | 0                 | 3                 | 95,08%           |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 4                 | 3                                                  | 1                 | 0                 | 75,00%           |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqPath COVID-19 RT-PCR Kit        | 2                 | 1                                                  | 0                 | 1                 | 50,00%           |
| CERTEST BIOTEC                                          | VIASURE SARS-CoV-2 S gene          | 26                | 26                                                 | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| DIASORIN                                                | Simplexa COVID-19 Direct Kit       | 4                 | 2                                                  | 0                 | 2                 | 50,00%           |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| IMMUNDIAGNOSTIK                                         | MutaPLEX Coronavirus               | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
|                                                         |                                    | <b>100</b>        | <b>93</b>                                          | <b>1</b>          | <b>6</b>          | <b>93,00%</b>    |
| <b>Genregion von den Teilnehmern nicht spezifiziert</b> |                                    |                   |                                                    |                   |                   |                  |
| ABBOTT                                                  | RealTime SARS-CoV-2                | 9                 | 9                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ALTONA DIAGNOSTIC                                       | RealStar SARS-CoV-2 RT-PCR Kit 1.0 | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ANDERE HERSTELLER                                       |                                    | 14                | 14                                                 | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ANICON                                                  | KyIt SARS-CoV-2 Confirmation RTU   | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ANICON                                                  | KyIt SARS-CoV-2 Screening RTU      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| APPLIED BIOSYSTEMS                                      | TaqMan 2019-nCoV Assay Kit v1      | 1                 | 1                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| BOSCH HEALTHCARE SOLUTIONS                              | Vivalytic VRI Multiplex Test       | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| EIGENE HERSTELLUNG                                      |                                    | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| EURO IMMUN                                              | EURORealTime SARS-CoV-2            | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| FAST-TRACK DIAGNOSTICS                                  | FTD SARS-CoV-2 assay               | 4                 | 4                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| GENESIG                                                 | Coronavirus COVID-19               | 6                 | 6                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| GERBION                                                 | virellaSARS-CoV-2 seqc             | 2                 | 2                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| ROCHE DIAGNOSTICS                                       | COBAS SARS-CoV-2 Test              | 11                | 11                                                 | 0                 | 0                 | 100,00%          |
| SEEGENE                                                 | Allplex 2019 n-CoV Assay           | 3                 | 3                                                  | 0                 | 0                 | 100,00%          |
|                                                         |                                    | <b>64</b>         | <b>64</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>100,00%</b>   |